



Getinge EDS8+

Trocknungs- und Lagerungsschrank

Endoskope

Immer einsatzbereit

Für Ihre Patientinnen und Patienten sollte jederzeit ein gereinigtes und desinfiziertes Endoskop bereitstehen – ohne Verzögerungen im Ablauf.

Der Getinge EDS8+ Trocknungs- und Lagerungsschrank stellt sicher, dass bis zu acht flexible Endoskope im desinfizierten Zustand bleiben und für den Gebrauch bereitstehen.

Sorgt dafür, dass Endoskope trocken und sicher sind

Mikroorganismen können sich innerhalb weniger Stunden auf ein kritisches Maß vermehren. Gereinigte und desinfizierte Endoskope müssen schnell getrocknet und ordnungsgemäß gelagert werden, um das Wachstum von Bakterien zu verhindern, das zu Infektionen bei Patientinnen und Patienten führen könnte.

Die Trocknung und Aufrechterhaltung der mikrobiellen Beständigkeit von Getinge EDS8+ für bis zu 60 Tage ist in unabhängigen Prüfungen nachgewiesen. Dies entspricht der EN 16442:2015.

HEPA-gefilterte Luft zirkuliert kontinuierlich durch die internen Kanäle und über die Oberflächen der Endoskope. Die Alarmfunktion stellt sicher, dass Luftstrom und Umgebungsbedingungen innerhalb der vorgegebenen Parameter für eine sichere Lagerung bleiben. Horizontale Ablageflächen verhindern eine Kreuzkontamination zwischen den Endoskopen.

Es wurde für den Einsatz mit den Getinge E-RDGs konzipiert und verfügt über eine Alarmfunktion, die aktiviert werden kann, um Benutzer/-innen auf eine zu lange Zeitspanne zwischen der Aufbereitung im E-RDG und dem Beladen des EDS8+ hinzuweisen.



Schutz Ihrer Endoskope


Optimierung Ihrer Arbeitsabläufe



Fußpedal für die handfreie Bedienung

Schutz vor Schäden am Endoskop

- Der gleiche Korb wie beim Getinge E-RDG minimiert Risiken während des Transfers
- Die Tür lässt sich per Fußpedal öffnen, sodass sich das Bedienpersonal voll auf die Handhabung des Endoskops beim Be- und Entladen konzentrieren kann.

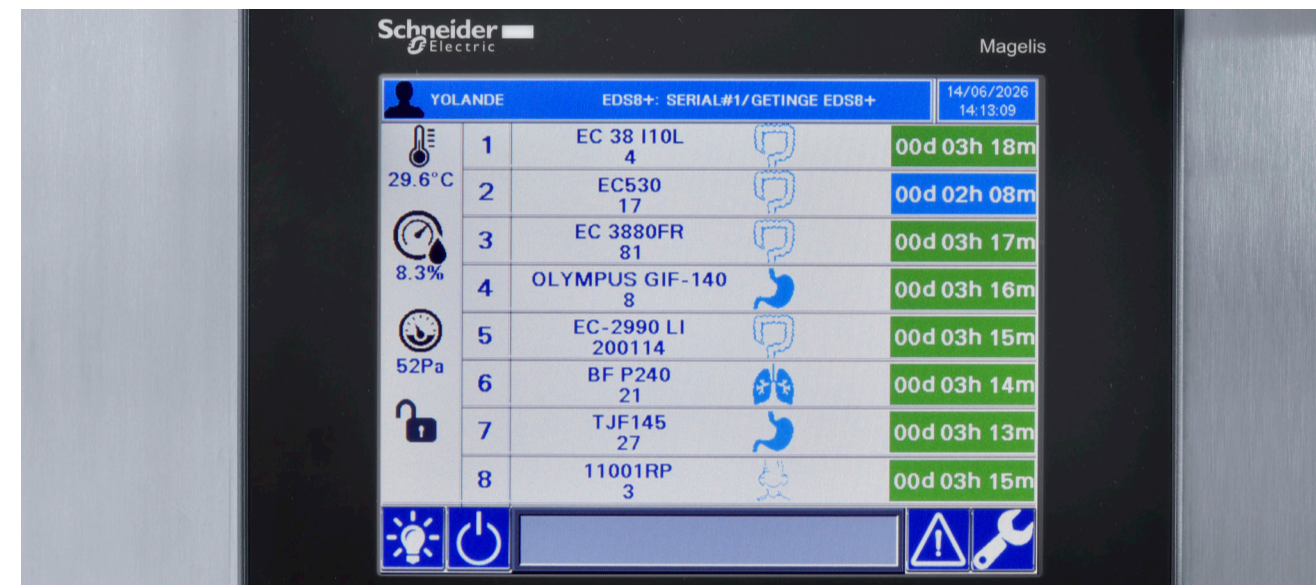

Benutzerfreundliches Display

Effizientes Management des Endoskopbestands

- Ein benutzerfreundliches grafisches Display zeigt den Namen, Status und Standort aller Endoskope im Schrank an
- Bei aktivierter Türsicherungsfunktion haben nur autorisierte Personen Zugriff auf den Schrank.
- Die Integration mit T-DOC ermöglicht eine durchgängige Rückverfolgbarkeit und effiziente Verwaltung von Endoskopen im gesamten Krankenhaus.



RFID-Scanner für verbesserte Sicherheit

Einfache Dokumentation für Audits und Rückverfolgbarkeit

- Erfasst Benutzer- und Bediener-IDs für eine lückenlose Rückverfolgbarkeit
- Der integrierte Drucker stellt Prozessprotokolle bei Bedarf als Papiausdruck zur Verfügung
- T-DOC gewährleistet die lückenlose Rückverfolgbarkeit des gesamten Endoskop-Aufbereitungsprozesses einschließlich der Trocknungsdaten und dokumentiert den Einsatz des Endoskops bis zur Zuordnung zur Patientin bzw. zum Patienten. Dies unterstützt Compliance-Anforderungen und stärkt die Patientensicherheit.

Diese Informationen richten sich ausschließlich an medizinisches Fachpersonal oder andere professionelle Zielgruppen und dienen nur zu Informationszwecken. Sie sind nicht vollständig und sollten daher nicht als Ersatz für die Gebrauchsanweisung, die Serviceanleitung oder eine medizinische Beratung herangezogen werden. Getinge übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Handlungen oder Unterlassungen einer Person oder Partei, die auf diesem Material basieren, und das Vertrauen in dieses Material erfolgt ausschließlich auf Risiko der Benutzer/-innen.

Die genannten Therapien, Lösungen oder Produkte sind möglicherweise in Ihrem Land nicht verfügbar oder zulässig. Informationen dürfen ohne schriftliche Genehmigung von Getinge weder ganz noch teilweise kopiert oder verwendet werden.

Möglicherweise steht die behördliche Zulassung zur Vermarktung der dargestellten Produkte in Ihrem Land noch aus.
Bitte beachten Sie, dass der Farbton zwischen Bildern und tatsächlichen Produkten variieren kann.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer zuständigen Getinge-Vertretung.

Hersteller:
Getinge Disinfection AB • Ljungadalsgatan 11 • 352 46 Växjö • Schweden • +46 10 335 06 00 • info@getinge.com

Ihren lokalen Getinge-Vertriebspartner finden Sie unter der folgenden Adresse:
Getinge Deutschland GmbH • Kehler Str. 31 • 76437 Rastatt • Deutschland • +49 7222 932-0 • info.vertrieb@getinge.com
Getinge Österreich GmbH • Lemböckgasse 49 • 1230 Wien • Österreich • +43 1 8651487-0 • info-at@getinge.com
Getinge Schweiz AG • Quellenstrasse 41B • 4310 Rheinfelden • Schweiz • +41 61 836 47 70 • info@getinge.ch

Besuchen Sie unser Experience Center:
Getinge Experience Center Frankfurt • De-Saint-Exupéry-Straße 10 • 60549 Frankfurt am Main • Deutschland • gec.frankfurt@getinge.com

Das Produkt ist auch mit Produkten der folgenden Hersteller kompatibel:
Getinge IT Solutions ApS • Dampfargevej 21 • 2100 Kopenhagen • Dänemark • +45 33 33 88 55 • info@getinge.com