



Maximiser l'efficacité et la productivité

avec le stérilisateur à vapeur de
grande capacité Getinge GSS610H



Une technologie de pointe*

et hautement intégrée

Nos stérilisateurs s'intègrent à votre service de stérilisation dans le but d'optimiser le rendement. Ils fournissent des résultats cohérents et fiables.

Nous avons conçu le stérilisateur à vapeur Getinge GSS610H de grande capacité sans compromis. Le Getinge GSS610H vise à optimiser automatiquement le temps de cycle et la consommation énergétique pour chaque charge. Il est compatible avec les systèmes de chargement Getinge et Kangourou d'Hupfer pour maximiser le retour sur investissement de votre stérilisation.

Le Getinge GSS610H repose sur des fondations solides basées sur la confiance, avec près de 90 ans d'expérience dans la stérilisation à la vapeur. Nous comprenons vos besoins et visons à vous offrir la fiabilité, la précision et la rentabilité nécessaires à la réussite de votre installation.

*Par rapport à la précédente génération de stérilisateurs à vapeur Getinge.

Succès et satisfaction à long terme

Optimisez la valeur de votre investissement

Le stérilisateur GSS610H a été conçu dans le but de permettre à votre service de stérilisation de continuer à fonctionner au maximum de ses performances, optimisant ainsi le temps de fonctionnement et l'efficacité.

Un procédé à la vapeur propre améliore la durée de vie de vos instruments

Les minéraux dissous dans la vapeur d'eau peuvent raccourcir la durée de vie des instruments par coloration, piqûre et corrosion. Notre système adapté à la vapeur propre, avec des composants de série en acier inoxydable de première qualité, réduit l'impact financier à long terme induit par le remplacement prématuré des instruments.

Débit plus rapide*

La mise en service automatisée et les temps de traitement rapides garantissent que votre installation dispose d'un approvisionnement régulier d'instruments stérilisés prêts à l'emploi.

Des ressources optimisées

Le stérilisateur GSS610H contrôle la température de l'eau de vidange pour minimiser la consommation d'eau de refroidissement. Cela permet d'optimiser la consommation d'énergie pour chaque cycle.

Stérilisateur robuste et bien pensé

L'accès au stérilisateur est facilité par sa conception modulaire, ce qui simplifie l'entretien courant ou le remplacement des pièces.

Une capacité élevée pour plus de productivité

Traitement d'un grand volume d'instruments.

La cuve de grande taille du stérilisateur Getinge GSS610H peut supporter des charges importantes.

Un chargement et un déchargement mains libres

Les tables de chargement et déchargement automatiques visent à améliorer l'efficacité et la sécurité.



L'amélioration du flux de travail

booste l'efficacité

Le stérilisateur GSS610H a été conçu en collaboration avec les opérateurs et les responsables d'unité centrale de stérilisation afin de créer une interface intuitive et efficace pour les utilisateurs de tous niveaux d'expérience.

Fonction de mise en marche et d'arrêt automatique

Un système de démarrage automatique sans présence humaine réduit efficacement le temps d'attente avant le début du premier processus. Le préchauffage de l'enveloppe de la cuve avant d'effectuer les tests du système peut nécessiter un cycle de stérilisation supplémentaire, ce qui a pour effet d'augmenter le débit global.

Une interface utilisateur intuitive

Le stérilisateur GSS610H est doté d'une interface utilisateur intuitive. Le design intuitif requiert une formation moins exigeante, et peut être utilisé par un personnel au degré d'expérience varié.

Les grands écrans haute résolution de 10 pouces facilitent la lecture et le suivi, y compris de loin. Ces écrans affichent les informations de procédé les plus critiques de manière claire et logique, y compris le temps de cycle restant et les sélections de démarrage.



Une progression visible en un coup d'œil :
Visibilité du temps restant, même à distance.



Conception hygiénique, facile à nettoyer

Les surfaces en acier inoxydable poli d'une grande qualité possèdent des coins arrondis et lisses. La porte de la cuve affleurante et le nombre réduit de soudures facilitent un nettoyage rapide et efficace.

Responsabilisation facilitée par la technologie RFID

Une fonction de connexion électronique RFID contrôle l'accès des utilisateurs. Afin de gagner du temps, améliorer le flux de travail et améliorer le suivi, cette fonction utilise le même codage de sécurité que celui utilisé ailleurs dans l'établissement.



L'interface utilisateur présente des informations claires et épurées : seulement ce dont vous avez besoin, au moment où vous en avez besoin.



Une assistance claire à lire pour résoudre des problèmes ou accéder à des fonctions avancées est disponible directement à partir de l'interface utilisateur.



Dès qu'une alarme se déclenche, des instructions claires sont affichées à l'écran pour vous indiquer les mesures à entreprendre.

Chargement et déchargement performants

Pour une manipulation ergonomique des articles stériles

Les chariots SMART déplacent les charges lourdes avec facilité

Les chariots SMART de Getinge sont faciles à manœuvrer et à nettoyer, pour un chargement et déchargement sans effort.

Le chargement et le déchargement automatiques améliorent l'efficacité

Les tables de chargement et déchargement automatiques Getinge charge et décharge automatiquement les dispositifs dès que le stérilisateur est prêt. Le système optimise la manipulation des éléments sans besoin de surveillance directe de la part de l'opérateur. Il minimise les actions manuelles et permet ainsi un flux de travail ergonomique pour le personnel.

Optimiser votre investissement

Le Getinge GSS610H est compatible avec le système de chargement Kangourou d'Hupfer, améliorant ainsi l'efficacité de votre service et optimisant votre investissement.

Avec le stérilisateur Getinge GSS610H, vous avez le choix entre un système de chargement automatique ou manuel.



Chariot SMART Getinge pour le chargement et le déchargement.



Le Getinge GSS610H est compatible avec le système de chargement Kangourou d'Hupfer.



Table de Chargement/déchargement automatique GL610

Une gestion efficace des données permet de rationaliser le flux de travail et vise à garantir la responsabilisation du personnel



Les meilleures pratiques de votre unité centrale de stérilisation sont en première ligne dans la lutte sans fin contre les infections nosocomiales (IAS). Le fait de pouvoir documenter et rappeler de manière efficace les données de lavage fournit une assurance aux organismes de régulation, aux organismes d'accréditation et à un public de mieux en mieux informé.

Accès aux données à la demande

Getinge Online est votre portail personnel en ligne. Il permet un accès à la demande aux données relatives aux équipements depuis votre ordinateur ou votre smartphone. Cet outil en ligne extrêmement sécurisé et crypté fournit un accès aux données de performances en temps réel et historiques, un stockage en ligne, un accès aux informations de commande de pièces de remplacement, à la maintenance préventive et aux solutions de résolution des pannes.

Capturer et stocker les données du cycle en temps réel

Les stérilisateurs à vapeur Getinge GSS610H s'intègrent à T-DOC, la solution haut de gamme de gestion des approvisionnements stériles et de traçabilité de Getinge. T-DOC saisit et stocke des données cycliques en temps réel et permet d'établir des rapports sur le rendement de l'équipement. Ceci constitue une source d'information précieuse pour les gestionnaires d'unité centrale de stérilisation et les administrateurs d'hôpitaux en les aidant à résoudre rapidement tout problème, à améliorer la planification de la production, et à vérifier la conformité.



Indicateurs Getinge Assured

Assurez-vous qu'il est stérile

Les infections associées aux soins de santé exercent une pression énorme sur le système de santé. Une vérification indépendante est nécessaire pour s'assurer que vos systèmes et procédures fonctionnent comme prévu.

L'usage quotidien de nos indicateurs Getinge Assured vous permet de vérifier de manière autonome que le processus de stérilisation est efficace et homogène. Les produits de confiance Getinge en matière de stérilité et d'assurance qualité fournissent une vérification et une documentation extrêmement fiables des performances des équipements et des processus.

Les indicateurs Getinge Assured peuvent être utilisés dans le cadre d'un audit de stérilisation ou pour la surveillance de routine des performances afin d'éliminer les « jugements » sur les performances.

Le test de type Bowie-Dick de Getinge demeure la référence en matière de tests journaliers du fonctionnement mécanique de votre stérilisateur à vapeur sous vide, garantissant que son système d'évacuation d'air fonctionne correctement.



En plus des kits de test Bowie-Dick, la gamme complète Getinge Assured Sterility Assurance comprend :

- Incubateurs et accessoires
- Indicateurs chimiques
- Rubans de stérilisation Getinge
- Indicateurs biologiques – vapeur et oxyde d'éthylène
- Systèmes de contrôle de la charge
- Contrôle du lavage
- Surveillance de surface

Getinge

Disponibilité maximale optimisée

L'optimisation des services liés à votre équipement constitue souvent une méthode inexploitée d'optimisation de la productivité et de réduction des coûts. L'offre de services Getinge Care garantira que votre équipement fonctionne toujours au meilleur de ses capacités pour vous permettre de vous concentrer sur ce qui compte : sauver des vies.

Prévenir les problèmes avant qu'ils ne surviennent

Que vous fassiez l'acquisition d'un nouveau stérilisateur vapeur ou d'une unité centrale de stérilisation complète, nous sommes là pour vous aider. Getinge Care suit un programme de maintenance préventive de routine et

s'assure du bon fonctionnement de votre équipement en vous imposant le minimum d'interruptions. Et si une intervention d'urgence s'impose, nos techniciens certifiés seront là pour vous aider rapidement à résoudre tout problème.

Avec un pack Getinge Care, vous pouvez prévoir vos dépenses pour le cycle de vie complet de votre équipement, et minimiser ainsi les dépenses non prévues. L'équipe de notre service financier peut analyser vos besoins et vos chiffres afin de vous offrir un ensemble de services qui vous fournira le meilleur rendement pour votre investissement. Contactez votre représentant Getinge pour en savoir plus.



Getinge Care Partner

Soutenir votre service technique interne



Getinge Care Preventive

Les intervalles d'entretien programmés optimisent la durée de fonctionnement



Getinge Care Plus

Une protection ininterrompue avec un contrôle complet des coûts



Getinge Care Premium


Une prise en charge complète pour une tranquillité d'esprit totale



Des solutions de financement répondant à vos besoins

Getinge Services Financiers

Getinge est bien plus qu'un fournisseur mondial d'équipement médical de pointe

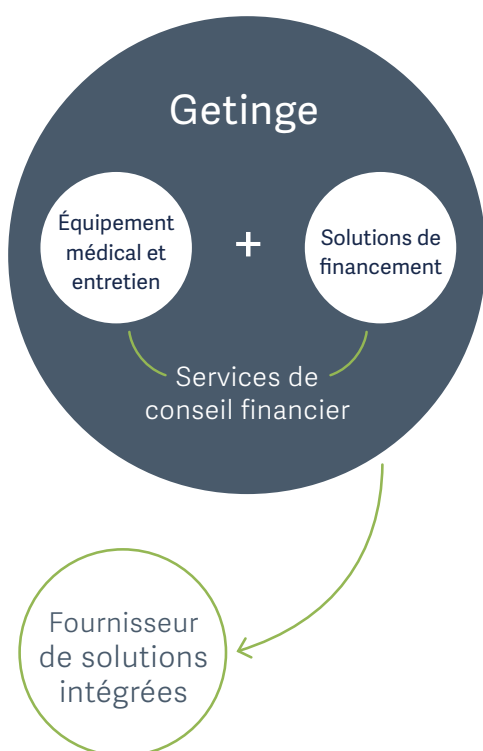

En tant que fournisseur de solutions intégrées, nous vous offrons un engagement de notre secteur industriel, assorti d'une expertise financière unique dans le secteur des technologies médicales.

Obtenir du financement à des taux concurrentiels

Les services financiers Getinge (GFS) vous aideront à financer votre équipement. Nos analystes financiers expérimentés ont fait leurs preuves et travaillent avec des hôpitaux publics et privés.

Nous travaillons en étroite collaboration avec notre équipe de vente pour comprendre vos besoins et concevoir la solution la mieux adaptée à vos exigences. Nos programmes de financement offrent une flexibilité et des taux compétitifs qui s'adaptent à votre budget.

Comprendre vos besoins locaux

Notre forte présence locale nous permet de comprendre les exigences et les défis spécifiques à votre pays. Nous avons établi de solides relations de longue date avec des organismes de crédit à l'exportation (OCE), des partenaires locaux et un groupe de prêteurs spécialisés afin de vous offrir une vaste gamme de solutions de financement.

Vous êtes à la recherche d'une solution financière pour un petit ou moyen volume de transactions ?

Contactez-nous ! Nous développons des solutions de financement sur mesure pour des organisations de différentes tailles. Notre approche progressive vise à rendre le processus de financement aussi simple et transparent que possible.

Obtenir le bon financement pour les bons produits

Notre équipe dévouée vous aidera à comprendre vos options et à trouver la meilleure solution de financement pour vos besoins. Contactez votre représentant commercial Getinge pour en savoir plus !

info.financialservices@getinge.com

Caractéristiques techniques



Le stérilisateur est disponible en quatre profondeurs de cuve

	Unité	10	14	15	21
Largeur de cuve	mm	672	672	672	672
Hauteur de cuve	mm	1 080	1 080	1 080	1 080
Profondeur de cuve	mm	1 040	1400	1 540	2 100
Capacité paniers*	pièces	8	12	12***	16
Capacité STU**	pièces	9	12	12	18

* Taille de panier SPRI : 585 x 395 x 195 mm (L x W x H)

ISO : 600 x 400 x 200 mm (L x W x H)

** Taille STU : 600 x 300 x 300 mm (L x W x H)

*** Voir les spécifications du produit pour trouver l'équipement de chargement approprié à l'espace utilisable.

Mentions légales - GSS610H - Le stérilisateur à vapeur pour soins de santé (modèle H) est destiné à stériliser des objets médicaux adaptés à la stérilisation à la vapeur haute pression. Il s'agit d'un dispositif médical de classe IIb, CE0123. Produit fabriqué par MAQUET GmbH, Allemagne. Pour un bon usage, veuillez lire attentivement toutes les instructions figurant dans la notice d'utilisation du produit.

PUB-2020-0035-B, version de février 2024



Getinge est un fournisseur mondial de solutions innovantes pour les blocs opératoires, les unités de soins intensifs, les services de stérilisation et pour les entités en lien avec les sciences de la vie. Grâce à notre connaissance du marché et à des partenariats étroits avec des experts cliniques, des professionnels de la santé et des spécialistes de l'industrie médicale, nous améliorons la vie quotidienne des personnes, aujourd'hui comme demain.

Maquet GmbH · Kehler Str. 31 · 76437 Rastatt · Germany · +49 7222 932-0 · info.sales@getinge.com

Trouvez votre représentant commercial Getinge :

Getinge France, société par actions simplifiées au capital de 8.793.677,10 euros, dont le siège social est situé à MASSY (91300) – Carnot Plaza, 14/16 Avenue Carnot - immatriculée sous le numéro 562 096 297 RCS EVRY · 02 38 25 88 88 · accueil.FRARD@getinge.com

www.getinge.fr