

Matelas Maquet SFC et IPC

Optimiser le confort du patient tout en réduisant les complications coûteuses

Les gammes de tables d'opération Maquet* sont équipées de matelas spéciaux visant à optimiser le confort du patient pendant l'opération et à améliorer la récupération postopératoire.



Matelas SFC (Soft Foam Core)



Coussins IPC* (Integral Protective Comfortable) : matelas et plaque de support combinés, fixation sans Velcro®.

Le bon matelas de table d'opération

Le choix d'un matelas de table d'opération adapté peut réduire le risque d'escarres post-chirurgicales. Les escarres liées au positionnement en salle d'opération sont l'une des principales causes de l'allongement de la durée d'hospitalisation des patients opérés³. Selon les estimations, le coût du décubitus se situe entre 14 000 et 40 000 dollars par patient.^{1,2}

Le choix de matelas de table d'opération appropriés peut réduire le risque de complications coûteuses et de retards dans le rétablissement. Les matelas SFC et IPC garantissent une répartition uniforme de la pression du poids, afin d'assurer la sécurité et la stabilité de la position du patient.

La conception hygiénique réduit les infections nosocomiales

La prévention des infections nosocomiales permet non seulement d'améliorer les résultats pour les patients, mais aussi de réduire la charge qui pèse sur le système de santé. Pour minimiser les infections nosocomiales, il est essentiel de procéder à un nettoyage efficace et approfondi.

La table d'opération Maquet Otesus** est conçue avec l'IPC sans Velcro® et d'un revêtement de peau pulvérisée reliant le plateau et la plaque de support pour permettre un nettoyage mécanique avec notre laveur-désinfecteur de chariot Getinge ** ou tout autre laveur-désinfecteur utilisant les mêmes paramètres de nettoyage.

Les matelas SFC and IPC fournissent :

- Excellente répartition de la pression
- Position sûre et stable du patient
- Protection contre le contact avec les surfaces métalliques
- Réduction des forces de cisaillement
- Facile à nettoyer :
 - SFC : nettoyage manuel
 - IPC : nettoyage manuel et mécanique***
- Conducteur électrique selon la norme internationale IEC 60601-1
- Sans latex
- Compatible avec le rayons X
- Conformité CE à la directive 2017/745 UE


* IPC est disponible pour les accessoires dédiés uniquement ainsi que pour les plateaux de table 1160.

** Valable uniquement pour les plateaux de table 1160.10/30 DC


*** Veuillez vous référer à l'IFU

Comparaison entre les matelas IPC et SFC


Valeur moyenne de la pression (sacrum)

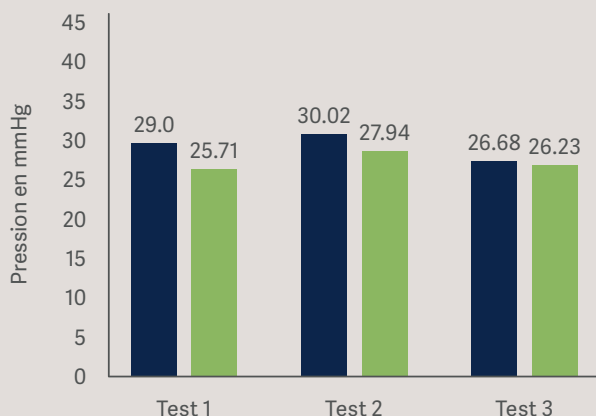


Valeur moyenne de la pression maximale (sacrum)

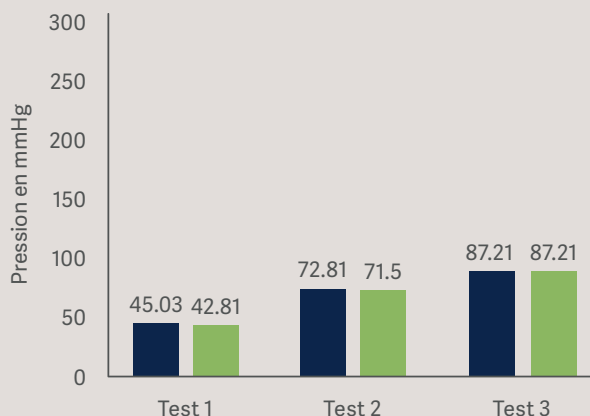

■ Matelas IPC
■ Matelas SFC

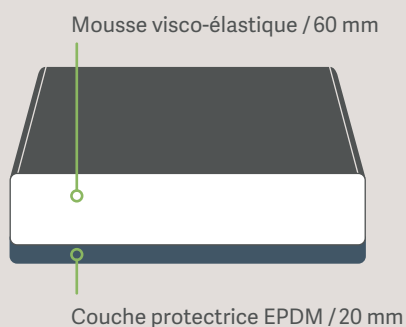

Le **matelas SFC** de 80 mm d'épaisseur est constitué de plusieurs couches. La mousse visco-élastique assure la répartition du poids du corps sur la plus grande surface possible. La couche de protection en EPDM protège efficacement le patient qui s'allonge sur la plaque de support. Lors des changements de charge, l'air circule sans entrave grâce à une membrane spéciale située sur la face inférieure du coussin. Cette membrane semi-perméable empêche simultanément la pénétration de l'humidité. Le tissu de recouvrement bi-élastique réduit les plis et les forces de cisaillement..

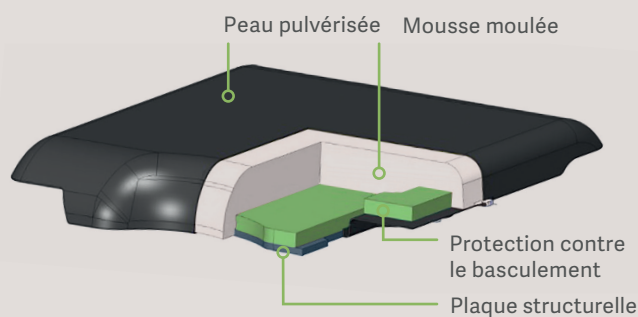

Les **matelas IPC** sont uniques et innovants. Ils offrent d'excellentes performances en matière de soulagement de la pression. Un noyau interne en forme de sandwich relie une protection contre l'usure de 20 mm et une mousse moulée de 60 mm à une plaque de support, qui est ensuite recouverte d'une peau pulvérisée. Les coussins hygiéniques, sans Velcro®, sont imperméables et peuvent être décontaminés et désinfectés mécaniquement en fonction du plateau de table et des accessoires.

1 Armstrong D, Bortz P. An integrative review of pressure relief in surgical patients. AORN J. 2001;73(3):645-657

2 Price MC, Whitney JD, King CA, Doughty D. Development of a risk assessment tool for intraoperative pressure ulcers. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2005;32(1):19-30.

3 Lenhardt R, et al. Mild Intraoperative Hypothermia Prolongs Postanesthetic Recovery. Anesthesiology. December 1997, Vol. 87, 1318-1323.

Ce document est destiné à fournir des informations à un public international en dehors des États-Unis.

Maquet GmbH · Kehler Str. 31 · 76437 Rastatt · Germany · +49 7222 932-0 ·

Getinge France, société par actions simplifiée au capital de 8.793.677,10 euros, dont le siège social est situé à MASSY

(91300) – Carnot Plaza, 14/16 Avenue Carnot - immatriculée sous le numéro 562 096 297 RCS EVRY · 02 38 25 88 88 ·

accueil.FRARD@getinge.com · PUB-2023-0797-A, version de novembre 2023.