

Porte-jambe et coquille porte-jambe pour position lithotomique

Un seul système pour une large gamme de poids de patients

Le bon positionnement de la jambe et du pied est essentiel pour le confort du patient et assure un accès efficace au site chirurgical en gynécologie, obstétrique, urologie et proctologie.

Notre système de porte-jambes peut désormais être utilisé avec deux variantes de coquille porte-jambe supportant jusqu'à 160 ou 250 kg pour couvrir un large éventail de patients.



Un porte-jambe qui aide à minimiser votre investissement et à gagner du temps entre les interventions



La coquille porte-jambe standard (noire) peut supporter des patients pesant jusqu'à 160 kg





La coquille porte-jambe Adipositas (bleue) peut supporter des patients pesant jusqu'à 250 kg

Confort du patient : L'interface à lame permet de rapprocher la jambe du point de rotation de la hanche. Cela réduit les contraintes sur les patients avec une amplitude de mouvement limitée au niveau de l'articulation de la hanche. Les ailettes latérales sont fournies avec les coquilles porte-jambe pour assurer une meilleure stabilité de la jambe* et pour empêcher la torsion de la jambe vers l'extérieur.

*par rapport à notre ancienne gamme

Gain de temps : Il n'est pas nécessaire de changer le porte-jambes entre les interventions chirurgicales ; il suffit de changer la coquille porte-jambe pour l'adapter au poids du patient. La mise en place est simple et rapide grâce à l'interface à clic du système de fermeture. Deux types de coquilles porte-jambe sont compatibles avec le porte-jambe. Chacun dispose de son propre code couleur pour une identification facile.

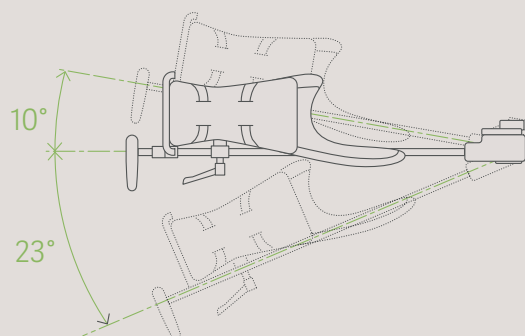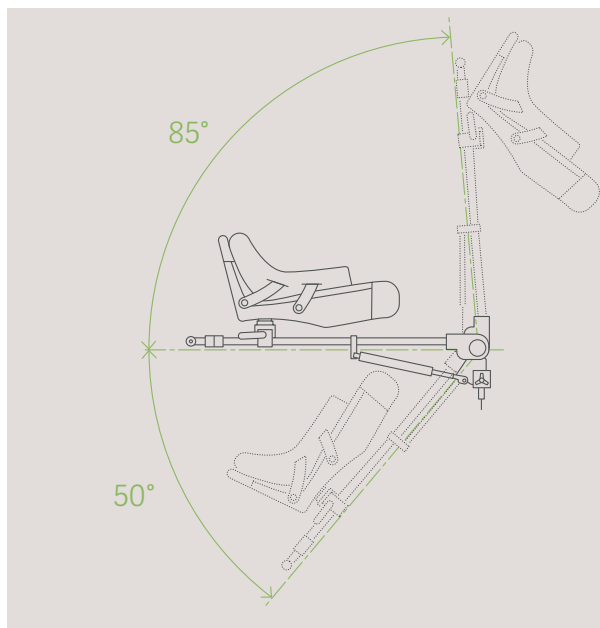

La bonne position pour chaque patient :

Les angles de réglage du porte-jambe varient de 85° vers le haut à 50° vers le bas. Les possibilités d'abduction vont de 10° à 23°.

Un système compatible : Grâce au serrage avec interface à lame, le système peut s'adapter à la plupart des rails latéraux disponibles sur le marché.

Compatibilité selon la taille des rails latéraux

Pays	mm
UE	10 x 25
États-Unis	9,53 x 28,57
Royaume-Uni	6,35 x 31,75
Suisse	10 x 30
Australie	6,35 x 38,1
Japon	9 x 32

Mentions légales - Porte-jambes (1003.80A0) - En combinaison avec une coquille porte-jambe et un clameau pour support de lames, dispositif destiné au placement et au positionnement de la jambe d'un patient juste avant, pendant et après l'intervention chirurgicale, ainsi que pour l'examen et le traitement, sur une table d'opération. Il s'agit d'un dispositif médical de classe I. Produit fabriqué par MAQUET GmbH, Allemagne. Pour un bon usage, veuillez lire attentivement toutes les instructions figurant dans la notice d'utilisation du produit. PUB-2022-0426-B, version de Février 2024.

Getinge France - société par actions simplifiée au capital de 8.793.677,10 euros, dont le siège social est situé à MASSY (91300) - Carnot Plaza, 14/16 Avenue Carnot - immatriculée sous le numéro 562 096 297 RCS EVRY - 02 38 25 88 88 - accueil.FRARD@getinge.com

www.getinge.fr

GETINGE 