

T-DOC Cycle

Optimisation de l'efficacité des équipements

Soutenez un flux de travail entièrement digital en stockant en toute sécurité les données de processus de votre équipement, garantissant ainsi la conformité avec les normes réglementaires. Favorisez une production stérile sans papier et plus durable et améliorez la prise de décision grâce à l'état de l'équipement en temps réel et à des fonctionnalités de rapport complètes.



Stockage sûr et sans papier de vos données

Vos données provenant de plusieurs types d'équipements peuvent facilement être enregistrées, stockées, consultées et extraites de T-DOC en cas de besoin.



Des informations précieuses sur les performances de l'équipement

Prenez des décisions fondées sur des données en vous appuyant sur des rapports détaillés et visuels concernant les processus, l'utilisation et les erreurs de votre équipement, et identifiez les domaines à améliorer.



Respect des normes réglementaires

Assurer la conformité avec les processus requis par votre établissement ainsi qu'avec les normes réglementaires locales, nationales et internationales.




Statut des équipements en temps réel d'un seul coup d'œil

Avec T-DOC Machine Viewer - une vue d'ensemble facile à interpréter de tous vos équipements connectés - vous pouvez facilement surveiller tous les statuts de vos équipements afin de garantir un temps de fonctionnement maximal.



L'enregistrement des données peut être utilisé dans deux cas de figure :

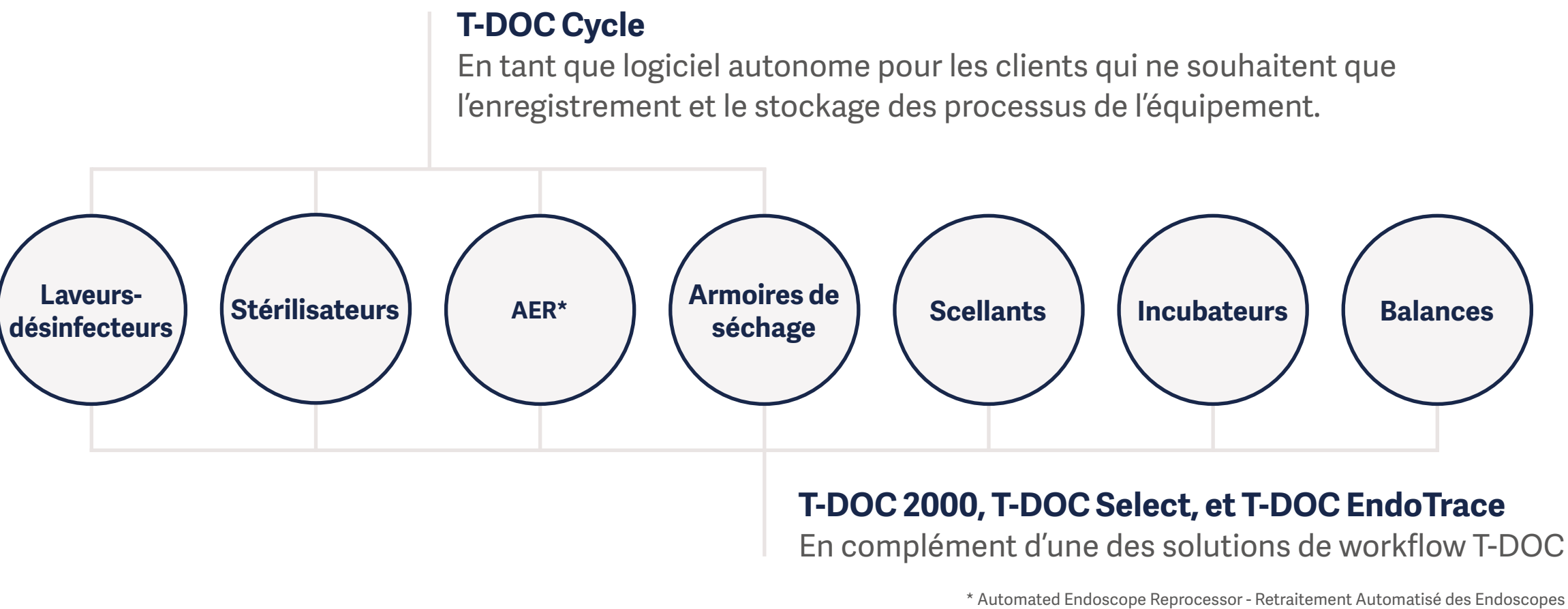

Enregistrement des données en temps réel pour un flux de travail fluide

T-DOC saisit des données en temps réel telles que les phases du cycle, la durée, la température, la pression, l'identification de l'équipement, le type de programme, l'exposition au détergent et les codes d'erreur, en fonction de l'équipement. Toutes les données sont stockées électroniquement et peuvent être affichées sous forme de tableaux, de graphiques ou de listes. En cas d'erreur de cycle, le personnel est averti avant de poursuivre le processus de vérification.

Pour le retraitement des endoscopes, T-DOC enregistre l'étiquette RFID de l'endoscope, le patient et le médecin, garantissant ainsi la sécurité du patient et une documentation complète en cas de rappel.

Prise en charge de plusieurs types et marques d'équipements

T-DOC permet l'enregistrement transparent des données d'une large gamme d'équipements de retraitement dans les unités stériles et les unités de retraitement des endoscopes. Outre la prise en charge complète de la plupart des équipements Getinge, plus de 20 modèles de fabricants différents peuvent être connectés, ce qui offre aux clients une plus grande flexibilité, quelle que soit la marque des équipements qu'ils utilisent.

Possibilités améliorées grâce à l'enregistrement des données T-DOC

Vous pouvez ajouter des postes de travail administratifs supplémentaires ou exporter les données relatives à l'équipement vers des solutions logicielles tierces :

T-DOC module Admin

Le module Admin, la saisie des données de base de l'équipement permet d'établir facilement des rapports standard et d'imprimer des fichiers. Un module est inclus avec T-DOC Cycle, quelle que soit la quantité d'équipement. Des postes de travail supplémentaires peuvent être ajoutés si nécessaire.

T-DOC module d'exportation des données de processus

Ce module permet aux utilisateurs d'exporter en toute transparence les données de traitement des machines de l'équipement Getinge vers un logiciel tiers. Après l'exécution du processus, un fichier de lot contenant les données enregistrées et les valeurs spécifiques à l'équipement est exporté au format XML.



Premier pas vers une traçabilité totale

Pour une intégration complète dans les services de stérilisation ou de retraitement des endoscopes, T-DOC Cycle peut évoluer en fonction de vos besoins et être mis à niveau vers T-DOC 2000, T-DOC Select et T-DOC EndoTrace. Ces solutions permettent une traçabilité complète, une utilisation optimisée des ressources et une intégration à l'infrastructure informatique de votre établissement. Tout cela afin de garantir une livraison correcte et ponctuelle des procédures chirurgicales.

En savoir plus sur les solutions T-DOC

Veuillez vous référer à votre responsable commercial Getinge local pour plus d'informations sur les modèles d'équipement pris en charge.