



Getinge Aquadis Endo 110

Wenn es um Leistung geht

Endoskopaufbereitung Verlassen Sie sich auf unsere Kompetenz in der Endoskopie

Das umfassende Sortiment an automatischen Endoskop-Reinigungsgeräten, Reinigungsmitteln, Bürsten und Aufbewahrungslösungen wurde speziell entwickelt, um eine kontinuierliche, präzise und kosteneffiziente Aufbereitung zur Verbesserung der Patientensicherheit zu gewährleisten.

In Ihrer Einrichtung gilt eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Kreuzkontaminationen von Endoskopen. Wie auch bei uns.

Wir haben ein umfassendes Produktsortiment entwickelt, das nicht nur die effektive Reinigung von Endoskopen ermöglicht, sondern auch physische Barrieren zur Verhinderung unbeabsichtigter Kreuzkontaminationen bietet. Die intuitive, benutzerfreundliche Bedienung und vorprogrammierte Prozesse reduzieren das Risiko von Anwenderfehlern.

Mit Getinge können Sie einen konsistenten Workflow, hochwertige Ergebnisse und rückverfolgbare Prozesse sicherstellen. Für Ihre Patientinnen und Patienten sollte jederzeit ein gereinigtes und desinfiziertes Endoskop bereitstehen. Vertrauen Sie auf Getinge, wenn es darum geht, Ihre Anforderungen an die Reinigung und Aufbereitung von Endoskopen zu erfüllen.



Optimierte Endoskop-Aufbereitung Sicherstellung idealer Arbeitsabläufe

Getinge Aquadis Endo 110 wurde entwickelt, um sich an die Platz- und Volumenansforderungen Ihrer Endoskopieabteilung anzupassen und gleichzeitig einen guten Arbeitsablauf zu gewährleisten.

Getinge bietet ein kompaktes, automatisiertes Endoskop-Aufbereitungsgerät (E-RDG) in einem Einkammerformat mit direkter Platzierung nebeneinander für eine maximale Raumnutzung, echte Redundanz bei der Reinigung und Aufbereitung sowie Konfigurationen, die optimale Arbeitsabläufe unterstützen.

Durchreiche-Konfiguration

Getinge Aquadis Endo 110 kann als Durchreicheeinheit konfiguriert werden, die eine echte physische Barriere bildet und einen in eine Richtung gerichteten Workflow, vom unreinen zum reinen Bereich, gewährleistet. Die optionale Luftbarriere minimiert den Luftstrom zwischen beiden Seiten und trägt so dazu bei, die HLK-Kosten zu senken und das Risiko einer Kreuzkontamination zu minimieren.

Verriegelte Türen sorgen dafür, dass Endoskope erst dann auf der reinen Seite entnommen werden können, wenn die Aufbereitung abgeschlossen und freigegeben ist. Wenn im Prozess ein Fehler auftritt, lässt sich Aquadis Endo 110 nur auf der unreinen Seite öffnen.

Einzeltürkonfiguration

Der Aquadis Endo 110 in der Einzeltür-Version wurde entwickelt, um einen hohen Durchsatz und maximale Flexibilität für einen Aufbereitungsraum zu bieten, wenn eine Trennung nach unreinem und reinem Bereich nicht möglich ist.



Reinigen Sie Endoskope in nur 20 Minuten

Schnelle und effiziente Prozesse

+ Hoher Durchsatz

Ein schneller, 20-minütiger Standardprozess, einschließlich Reinigung und hochwirksamer Desinfektion für ein komplexes Endoskop oder zwei Einkanal- bzw. Endoskope ohne Kanal. Der automatische Anschluss bei der Beladung mit dem Getinge AquaLink Connector System verbessert ebenfalls die Produktivität.

+ Auf Leistung ausgelegt


Die robuste Edelstahlkonstruktion mit frontseitigen Komponenten gewährleistet einen schnellen und leichten Zugang für Wartungsarbeiten und maximale Verfügbarkeit.

+ Unkomplizierter Betrieb

Das Getinge AquaLink Connection System ermöglicht es dem Benutzer, das Endoskop vor der Beladung vorzubereiten und vereinfacht das manuell Adaptieren oder die Handhabung des Endoskops im Beladekorb. Dank der RFID-fähigen Programmauswahl und Prozessdokumentation erfolgt die Beladung ergonomisch und berührungslos, wodurch Fehler vermieden werden können.

+ Effektive Kanalüberwachung

Einzelkanalüberwachung mit Schwellenwerten basierend auf einem Durchflussbewertungsprogramm, mit dem der Zustand der Endoskopkanäle während des Prozesses und über seine Lebensdauer bewertet werden kann.

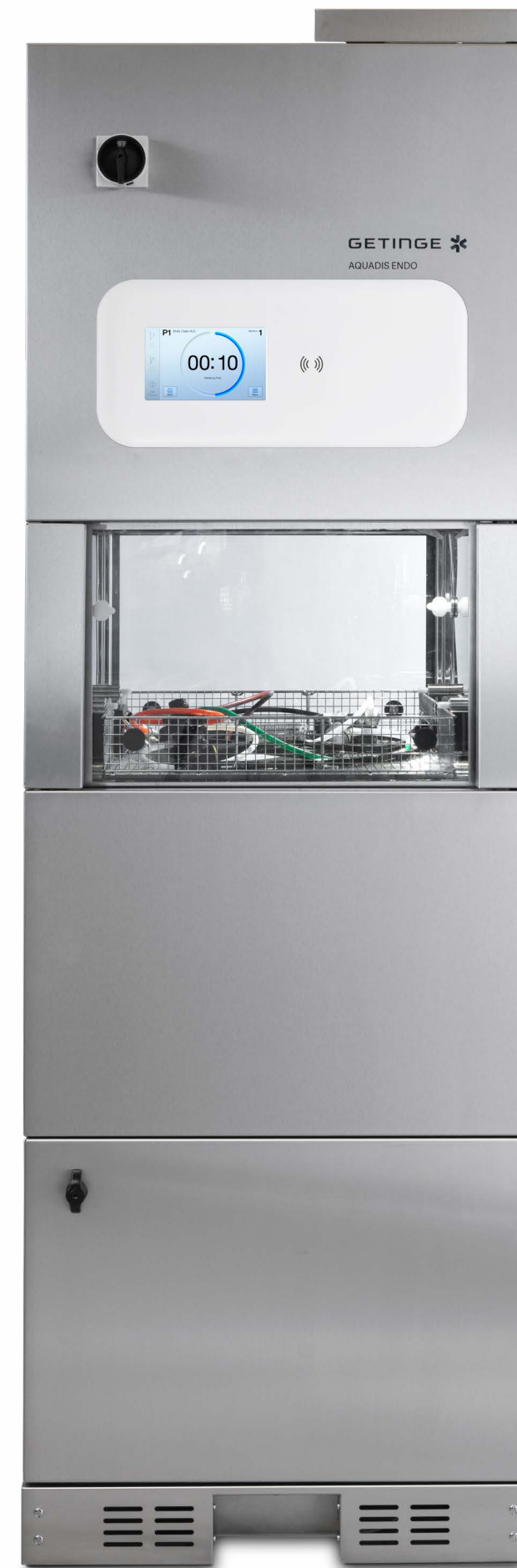

+ Ressourceneffizient

Das Dosiersystem reduziert die Menge der abgegebenen Chemikalien, während die spezielle Rezeptur ein minimales Spülen erfordert. Das Ergebnis ist ein geringerer Wasser- und Energieverbrauch mit weniger Chemikalienabfall für einen kosteneffizienteren Betrieb.*

+ Immer verbunden

Entwickelt für die nahtlose Verbindung mit dem FleetView-Gerätelebenszyklusmanagement und T-DOC-Lösungen für das Sterilgutmanagement, die eine Echtzeit-Gerätekonnektivität und ein umfassendes Management Ihres Reinigungs-, Aufbereitungs- und Desinfektions-Workflows für Endoskope ermöglichen.

+ Sicher für den Anwender

Ein geschlossenes Desinfektionsmittel-Dosiersystem und ergonomisches Be- und Entladen gewährleisten einen sicheren und benutzerfreundlichen Betrieb.

+ Bewährte Kompatibilität

Vollständig konform mit den Normen EN ISO 15883 Teil 1, 4 und 5 und validiert für alle wichtigen Typen und Marken von Endoskopen. In Kombination mit den speziell von Getinge zusammengestellten Chemikalien gewährleistet dies eine sichere, effektive und zuverlässige Reinigung, und Aufbereitung.

* Im Vergleich zu Getinge ED-Flow

Getinge AquaLink

Das optimierte Anschlusssystem

Das Getinge AquaLink Connection System besteht aus einem Andockblock, der Endoskope mit bis zu acht Kanälen andocken kann. Er wird an der Seite des Endoskop-Siebs montiert und ist direkt mit dem Kanal-Spülsystem des E-RDG verbunden.

Flexible und kosteneffiziente Einrichtung

- Der konfigurierbare Andockblock kann an spezifische Endoskopmodelle angepasst oder für mehrere Typen gemeinsam genutzt werden
- Der einfache Austausch einzelner Anschlüsse minimiert den Lagerbestand und senkt die Betriebskosten

Entwickelt für den Anwender

- Endoskope können für maximale Produktivität während des Betriebs der Einheit aufbereitet werden
- Ergonomische Ladehöhe und automatischer Anschluss innerhalb der Kammer ermöglichen eine effiziente und einfache Beladung
- Farbcodierte Anschlüsse ermöglichen eine schnellere Einrichtung mit minimalem Fehlerpotenzial

Bewährte Kompatibilität

- Anschlüsse sind Medizinprodukte der Klasse I gemäß der Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745 (MDR)
- Getinge entwickelt das Anschlussportfolio kontinuierlich in Zusammenarbeit mit den führenden Endoskopherstellern weiter, um Lösungen für die neuesten Endoskopmodelle anzubieten



Unkomplizierter Betrieb

Effektive Leistung

Der Aquadis Endo 110 wurde entwickelt, um jeden Schritt des Reinigungs-, Aufbereitungs- und Desinfektionsworkflows für Endoskope zu vereinfachen – manuelle Aufgaben werden minimiert, effektive Ergebnisse sichergestellt und die vollständige Rückverfolgbarkeit aufrechterhalten. Er wurde typ-geprüft und entspricht vollständig EN ISO 15883 Teil 1, 4 und 5.

Bedienung ohne Einsatz der Hände

- Der Bediener:
 - belädt das Sieb
 - scannt seinen RFID-Benutzerausweis
 - betätigt das Fußpedal, um das Programm zu starten
- Minimierung des Risikos einer Kreuzkontamination
- Vereinfachter Arbeitsablauf

Automatisierte Datenerfassung

- Benutzer- und Endoskopinformationen werden zu Beginn jedes Zyklus automatisch aufgezeichnet
- Details zu den Chemikalien, einschließlich Chargennummer und Verfallsdatum, werden ebenfalls im Prozessprotokoll dokumentiert

Fehlerfreier Prozess

- Alle wichtigen Prozessparameter werden vom Steuersystem überwacht und der Prozess wird bei Abweichungen gestoppt
- Das Endoskop-RFID-Tag verfügt über spezifische festgelegte Flussparameter, die den Benutzer im Falle einer Blockierung oder Trennung warnen
- Die RFID-Technologie stellt sicher, dass nur aktive, typ-geprüfte Chemikalien verwendet werden



Intuitiv und einfach zu bedienen Macht Sie zum Experten

Getinge Aquadis Endo 110 zeichnet sich durch seine ausgezeichnete, bedienerfreundliche Benutzeroberfläche aus. Sein intuitives Design ist mit anderen Produkten von Getinge kompatibel und kann auch von weniger erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern problemlos bedient werden.

Das große hochauflösende Display ist einfach abzulesen und zu überwachen. Kritische Statusinformationen werden übersichtlich und logisch angezeigt.

Verbleibende Zeit und Endoskopmodell




Die 7-Zoll-Bildschirme erleichtern die Anzeige der verbleibenden Prozessdauer und des Endoskopmodells.



Übersichtliche Menüoptionen erleichtern die Auswahl eines alternativen Programms, falls erforderlich.

Status auf einen Blick

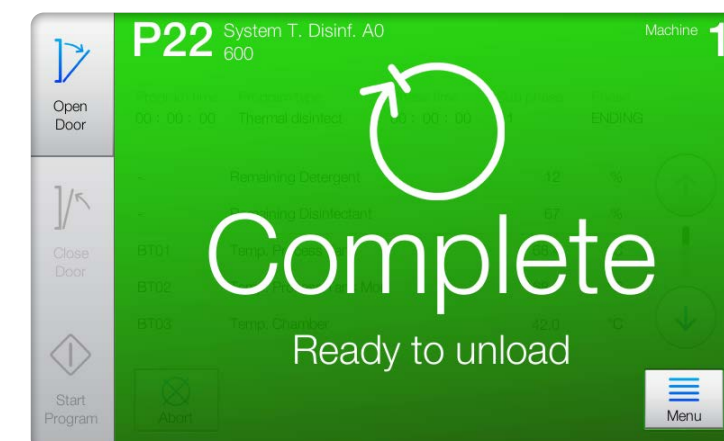

Die Benutzeroberfläche liefert klare und übersichtliche Informationen – und zwar nur die Informationen, die Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt benötigen, nicht mehr und nicht weniger.



Klare und einfach verständliche Hilfen zur Problembehebung oder für den Zugang zu erweiterten Funktionen sind direkt über die Benutzeroberfläche verfügbar.



Im Hinblick auf Ressourceneffizienz entwickelt Sichere und wirksame Chemikalien

Getinge hat neue Chemikalien für die Verwendung im Aquadis Endo 110 entwickelt, um die Leistung zu optimieren. Die kombinierten Chemikalien ermöglichen kürzere Zyklen, einen geringeren Wasserverbrauch*, minimieren die Behälterlogistik und sind mit allen führenden Marken flexibler Endoskope kompatibel.



Smartes Chemikalienmanagement

Die RFID-Technologie stellt sicher, dass nur aktive, typ-geprüfte Chemikalien für den Prozess verwendet werden, und dokumentiert automatisch die Chargennummer und das Ablaufdatum im E-RDG-Prozessprotokoll.

Umweltbewusstsein

Vollständig biologisch abbaubare Formel und recyclingfähige Verpackung. Die Zusammensetzung des Desinfektionsmittels in einem einzelnen Produkt senkt den CO₂-Fußabdruck, da dadurch das Versandvolumen reduziert und weniger Plastikabfall erzeugt wird.

* Im Vergleich zu früheren Chemikalien, die in Getinge ED-Flow verwendet wurden

XEN Endo

- Mildes alkalisches und enzymatisches Reinigungsmittel, um die Vorteile beider Chemikalien zu nutzen
- Gut dokumentierte Wirksamkeit bei der Protein- und Biofilmentfernung
- 24 Monate haltbar

XEN PA

- Einteiliges hochwirksames Desinfektionsmittel auf Peressigsäurebasis
- Nachgewiesene Wirksamkeit gegen Bakterien, Hefen, Pilze, Mykobakterien und Viren
- Sporizide Wirksamkeit (≥6-log)
- Ein Behälter mit spezieller Anschlusskappe minimiert das Risiko einer Anwenderexposition und verhindert Fehler bei der Beladung
- 18 Monate haltbar



Ein ressourceneffizientes E-RDG

Mit intelligenten technologischen Lösungen

Wir bei Getinge ergreifen Maßnahmen, um unsere Kunden in die Lage zu versetzen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Dazu untersuchen wir beispielsweise, wie wir unsere Produkte und Lösungen so ressourceneffizient wie möglich gestalten können. Wir verpflichten uns, unseren CO₂-Fußabdruck zu reduzieren. Dazu setzen wir uns ehrgeizige Ziele, um bis 2050 im Einklang mit der Science Based Targets Initiative (SBTi) klimaneutral zu werden.

EcoDesign ist bei Getinge Standard und konzentriert sich auf die Verwendung sichererer Materialien, die Integration zirkulärer Lösungen sowie die Reduzierung des Medien-, Energie- und Wasserverbrauchs.

Geringer Energieverbrauch


Aquadis Endo 110 vereint Leistung und Effizienz, indem die in jeder Phase verwendete Wassermenge minimiert und die Anzahl der Spülgänge reduziert wird. Dies führt zu einer Senkung des Wasserverbrauchs pro Prozess um bis zu 30 % und einer Senkung des jährlichen Gesamtenergieverbrauchs* um bis zu 6 % im Vergleich zum Getinge ED-Flow.

Optimierter Desinfektionsmittelverbrauch

Der Aquadis Endo 110 verfügt über ein neues hochkonzentriertes Einzel-Desinfektionsmittel, das die Menge der pro Zyklus verwendeten Chemikalien im Vergleich zum Vorgängermodell um etwa 18 % reduziert und Plastikabfälle von Behältern und den damit verbundenen CO₂-Fußabdruck durch den Transport vermeidet.



Bis zu 30 %
Wassereinsparung

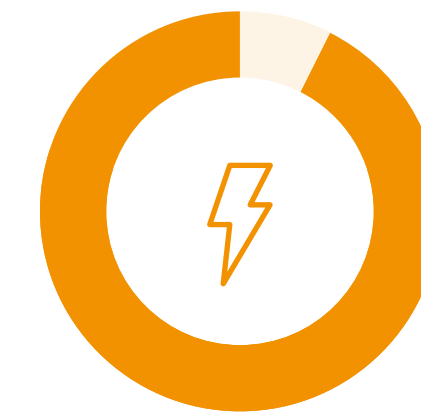

Bis zu 6 %
weniger Energie



Bis zu 18 %
weniger Chemikalien

* Berechnung der Energieeinsparungen basierend auf 3.000 Zyklen pro Jahr und täglicher thermischer Selbstdesinfektion

→ Erfahren Sie mehr über
unsere Nachhaltigkeitsziele

Digitale Vernetzung Endoskopie-Workflow-Management

T-DOC EndoTrace verfolgt jeden Schritt der Endoskop-Phasen, von der Verwendung bis zur Lagerung, und gewährleistet so vollständige Rückverfolgbarkeit, Compliance und kompromisslose Patientensicherheit.

Aquadis Endo 110 verbindet sich nahtlos mit T-DOC EndoTrace, um wichtige Datenpunkte wie Zyklusphasen, Temperatur und RFID-Tags zu erfassen und gleichzeitig jedes Endoskop direkt mit Patientenakten bzw. medizinischen Dokumentationen zu verknüpfen. So entsteht eine vollständige Sicherheitskette, die die Dokumentation und das Vertrauen stärkt.

Die Ablaufzeiten können durch Vakuumversiegelung mit dem Getinge Vac-a-Scope verlängert werden, was dem Prozess eine weitere Ebene der Zuverlässigkeit verleiht. Das Personal wird Schritt für Schritt durch Bilder, Videos und Audiounterstützung geführt, was die korrekte Handhabung, Reinigung und Inspektion einfacher und konsistenter macht.

T-DOC EndoTrace bietet Flexibilität in jedem Schritt, verwaltet verschiedene Endoskope und wendet Zeitregeln an, um unnötige Reinigungs- und Aufbereitungsvorgänge sowie Verzögerungen zu vermeiden. Das Ergebnis sind sicherere Arbeitsabläufe, höhere Effizienz und die Gewissheit, dass jedes Endoskop jedes Mal richtig gehandhabt wird.


→ Erfahren Sie mehr über T-DOC EndoTrace



Digitale Vernetzung Management des Gerätelebenszyklus

Schließen Sie Ihr Aquadis Endo 110 an, um auf FleetView zuzugreifen und Echtzeit-Servicedaten und Nutzungseinblicke zu erhalten. Es hilft Ihnen, die Verfügbarkeit und Leistung Ihrer Geräte zu optimieren und ermöglicht gleichzeitig die Bestellung von Ersatzteilen, die Fehlerbehebung aus der Ferne und fachkundigen Support. Alles ist über ein kundenspezifisches und sicheres Webportal von Ihrem Tablet, Telefon oder Computer aus zugänglich.

FleetView ermöglicht Ihnen auch eine präzise Wartungsplanung, hilft Ihnen, Störungen zu vermeiden und ermöglicht Ihnen fundierte Entscheidungen, die die Zuverlässigkeit und Konformität stärken – und so Ihre Gesamtbetriebskosten senken.

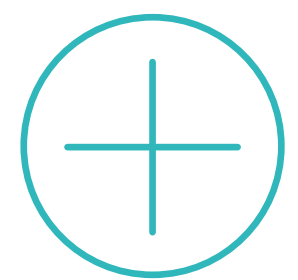

Verbessern Sie den Durchsatz bei der Endoskop-Aufbereitung, um mit der Behandlungsnachfrage Schritt zu halten



Erfahren Sie mehr über FleetView



Der erste Schritt bei der Endoskopaufbereitung

Endoskopreinigung

Der erste Schritt bei der Aufbereitung flexibler Endoskope beginnt mit der Vorreinigung im Behandlungsraum oder am Krankenbett.

Geringe Scope Pre-Clean

Geringe Scope Pre-Clean umfasst eine praktische, fertig gemischte Einmal-Reinigungslösung und einen zylindrischen Schwamm für die erste Phase der Dekontamination flexibler Endoskope am Behandlungsort. Die Vorreinigung ist besonders wichtig, wenn es zu einer Verzögerung vor der manuellen Reinigung kommt.



Geringe Clean Enzymatic Plus

Geringe Clean Enzymatic Plus enthält vier verschiedene Enzymtypen und eine ausgewogene Mischung an Tensiden für die effektive manuelle Reinigung flexibler Endoskope. Es entfernt mühelos Schmutz und Biofilme und besitzt eine ausgezeichnete Materialverträglichkeit mit Metallen, Kunststoffen und Elastomeren.



Reinigungsbürsten

Für die manuelle Reinigung von Endoskopen, einschließlich der inneren Kanäle, Ventile, Anschlüsse und Außenflächen, ist eine Auswahl an Bürsten erhältlich.



Geringe Face Shield

Der Gesichtsschutz Geringe Face Shield ist auf beiden Seiten mit einer beschlaghemmenden Beschichtung versehen und bietet eine ausreichende Abdeckung. Er sitzt dank einer gebogenen Schaumstoffauflage und einem elastischen Stirnband sicher und bequem.



Stellt sicher, dass Endoskope rechtzeitig zur Verfügung stehen

Getinge EDS8+

+ Aufbewahrung von acht Endoskopen für bis zu 60 Tage

Trocknung und Aufrechterhaltung der mikrobiellen Beständigkeit gemäß EN 16442 in unabhängigen Prüfungen nachgewiesen.¹

+ Kontinuierliche Luftumwälzung

HEPA-gefilterte Luft zirkuliert kontinuierlich durch die internen Kanäle der Endoskope und über deren Oberfläche.

+ Aktive Überwachung der Lagerbedingungen

Die Alarmfunktion stellt die Aufrechterhaltung eines angemessenen Luftstroms und der richtigen Umgebungsbedingungen für jedes einzelne Endoskop sicher.

+ Waagerechte Regale

Waagerechte Regalböden verhindern eine Kreuzkontamination zwischen Endoskopen und durch Bedienpersonal, das auf den Schrank zugreift.

→ Erfahren Sie mehr über Getinge EDS8+

+ Integrierte Rückverfolgbarkeit der Trocknungs- und Aufbewahrungsfunktion

Der RFID-Scanner ermöglicht die Eingabe von Endoskop-ID und Bediener-ID für die automatische Aufzeichnung und Dokumentation.

+ Schutz vor Schäden am Endoskop

Mit dem E-RDG compatible Körbe und die berührungslose Türbetätigung minimieren die manuelle Handhabung des Endoskops.

+ Effizientes Management des Endoskopbestands

Das benutzerfreundliche Display zeigt den Namen, Status und Standort aller Endoskope im Schrank an. Vorbereitet für den Anschluss an T-DOC EndoTrace- und T-DOC 2000-Systeme zur Verwaltung aller Endoskope innerhalb der Einrichtung.

+ Für einen ordnungsgemäßen Workflow

Der Benutzer wird benachrichtigt, wenn die Zeit zwischen dem Prozess im Aquadis Endo 110 und dem EDS8+ den vordefinierten Grenzwert überschreitet.



Sichere Lagerung und Transport flexibler Endoskope

Vac-a-Scope

Das Vac-a-Scope-System bietet eine kostengünstige Lösung für die sichere Lagerung und den Transport flexibler Endoskope und hilft somit, sie vor Kontamination und Beschädigung zu schützen. Dieses Tischsystem zur Verpackung von Endoskopen ist benutzerfreundlich und bereitet die Endoskope für die Lagerung vor, sodass sie einsatzbereit sind, wenn sie benötigt werden.

Das patentierte System bewahrt die Intaktheit der Instrumente von der Reinigung und Aufbereitung bis zum Behandlungsraum und ermöglicht die sichere Lagerung und den Transport von Endoskopen für bis zu 30 Tage², ohne dass sie wertvollen Platz in Ihrem Trocknungs- und Lagerungsschrank einnehmen.

→ Erfahren Sie mehr über Vac-a-Scope

+ Garantierte Sicherheit

Das System wurde im Hinblick auf die Patientensicherheit entwickelt und erhält die Intaktheit des Endoskops, indem Luft entfernt wird, ohne dass dabei Fremdstoffe eingeführt werden, die die Sicherheit oder Sauberkeit beeinträchtigen könnten. Es schützt das Endoskop während des Transports zwischen dem Reinigungsbereich und dem Behandlungsraum.

+ Anwenderfreundlich

Das Vac-a-Scope-System erfordert nur einen minimalen Schulungsaufwand und ist einfach zu bedienen. Der automatisierte Prozess reduziert das Risiko von Benutzerfehlern und erleichtert die Beladung und Verpackung von Endoskopen.

+ Sofort einsatzbereit

Hochwirksam desinfizierte Endoskope können an einem bequem erreichbaren Ort für den sofortigen Zugriff aufbewahrt werden, was das System ideal für Notfalleingriffe macht.

+ Kostengünstig

Seine kleinen Bodenmaße passen problemlos in Ihre Abteilung, minimieren den Verschleiß durch Reinigung, Aufbereitung und Transport, maximieren die Lebensdauer des Endoskops und reduzieren die Verbrauchsmaterialkosten, da keine zusätzlichen Chemikalien erforderlich sind.

+ Zubehör

Speziell entwickeltes und aufeinander abgestimmtes Zubehör ermöglicht eine sichere Lagerung und den geschützten Transport flexibler Endoskope.



Das vorgeformte Sieb für lange Endoskope sichert dieses während der Lagerung und dem Transport.


Verbesserung der Behandlungsergebnisse durch eine bessere Anwendung der Infektionskontrolle

Sterilisation von Endoskopen

Niedertemperatur-Sterilisation


Niedertemperatur-Sterilisatoren können Medizinprodukte in kurzer Zeit sicher sterilisieren, ohne sie schädlichen Temperaturen auszusetzen. Daher ist die Niedertemperatursterilisation ein gut umsetzbarer Prozess nach der Desinfektion mit minimalen Auswirkungen auf den Instrumentendurchlauf.

Getinge Poladus 150 und Getinge GSS67F werden routinemäßig für die Sterilisation von Endoskopen in AEMPs und Endoskopiezentren weltweit eingesetzt. Die wichtigsten Hersteller von Endoskopen und Aufsichtsbehörden haben die Verwendung von VH2O2 und Formaldehyd bereits vor längerer Zeit zugelassen.

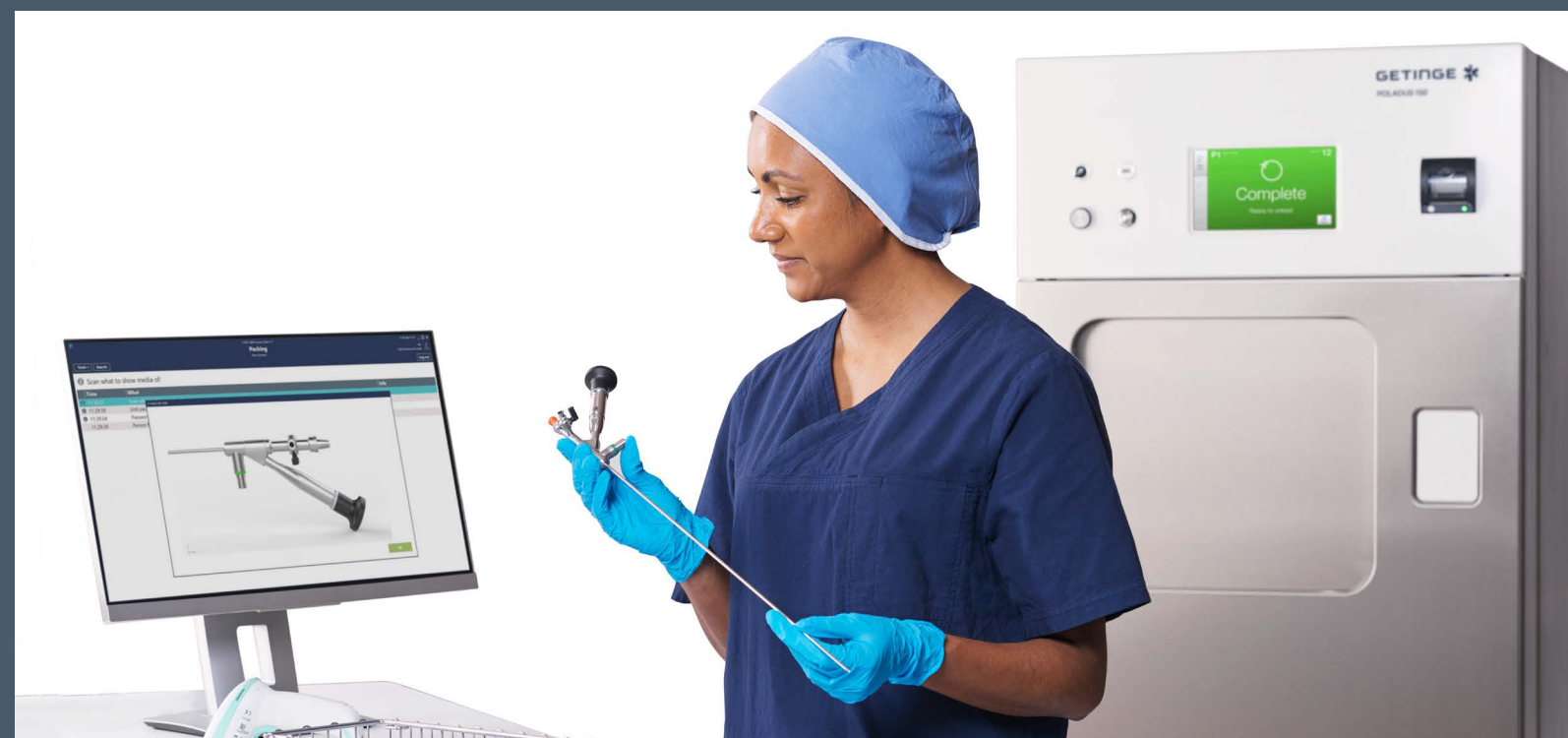

Getinge Poladus 150

Dieser zuverlässige und benutzerfreundliche VH2O2-Niedertemperatur-Sterilisator maximiert den Durchsatz hitzeempfindlicher chirurgischer Instrumente. Dank einer Kombination aus schnellen Sterilisations-Zyklen, großer Kammerkapazität sowie konsistenten und akkuraten Ergebnissen bietet er einen hohen Instrumentendurchsatz.

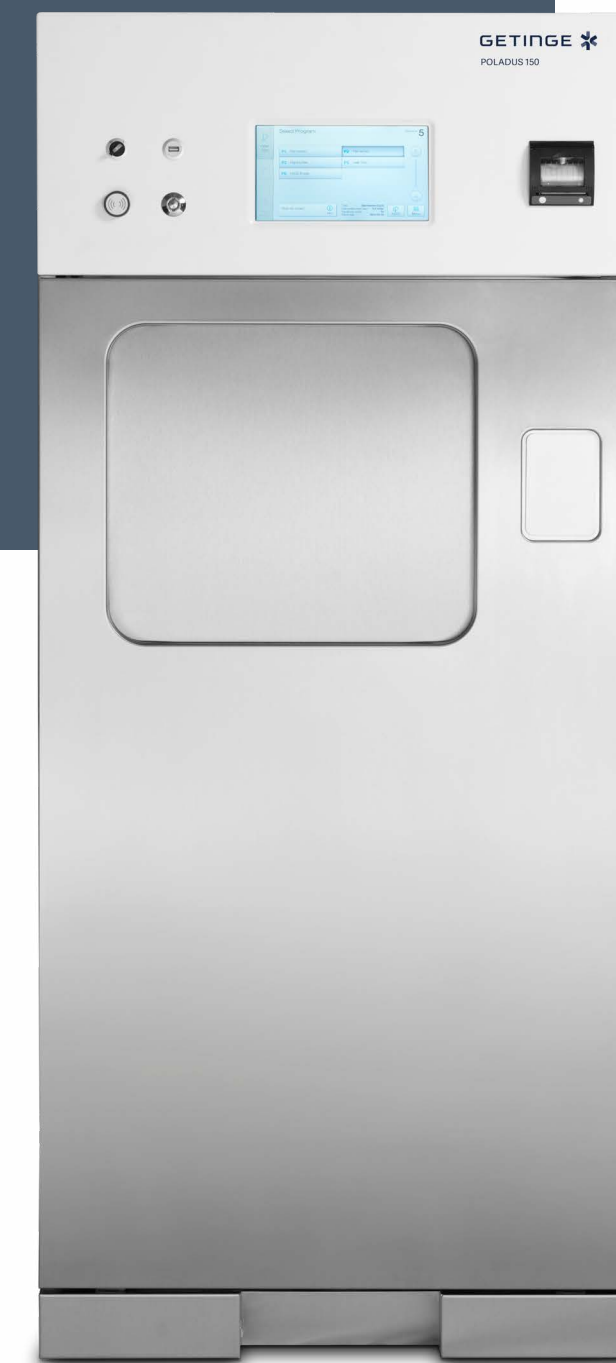

→ Erfahren Sie mehr über Poladus 150

Getinge GSS67F

Die Kombination aus Dampf- und Formaldehyd-Sterilisation ermöglicht große Flexibilität bei geringerem Platzbedarf. Der Sterilisator bietet eine hohe Effizienz bei schnellerem Durchlauf als herkömmliche Formaldehyd-Sterilisatoren.



→ Erfahren Sie mehr über Getinge GSS67F

Sich um diejenigen kümmern,
die für andere sorgen

Getinge Services

Getinge Services sind auf Ihre individuellen Anforderungen ausgerichtet und unterstützen Sie dabei, eine bestmögliche Patientenversorgung und Krankenhauseffizienz zu erreichen.

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Serviceanforderungen mit Getinge zu kombinieren und eine höhere Pflegequalität, Patientensicherheit, Geräteverfügbarkeit, Mitarbeiterzufriedenheit und einen optimierten Ressourceneinsatz zu gewährleisten.

Um Sie bestmöglich zu unterstützen, berücksichtigen wir alle Gesichtspunkte der Gesundheitsversorgung. Von der Wertschöpfung im Unternehmen und Finanzierungslösungen über die Planung und Gestaltung von Arbeitsabläufen bis hin zu Projektrealisierung, Mitarbeiterschulung, digitalen Supportlösungen und vorbeugender Wartung für eine höhere Geräteverfügbarkeit. Immer auf Ihre operativen und finanziellen Ziele abgestimmt.

Als Ihr Servicepartner arbeiten wir eng mit Ihnen zusammen, um Chancen und Herausforderungen zur Verbesserung der Behandlungsergebnisse und zur Optimierung Ihres Ressourceneinsatzes zu erkennen. Immer mit dem Ziel, einen bewährten Mehrwert für Ihr Krankenhaus zu schaffen.



Literaturhinweise

- 1. Ah-Dip, C. 2015. „Compliance certificate of a drying and storage cabinet for thermolabile endoscopes to EN 16442:2015 - EDS8 Getinge-Lancer“, Biotech-Germande
- 2. Gemäß EN 16442:2015 :

Diese Informationen richten sich ausschließlich an medizinisches Fachpersonal oder andere professionelle Zielgruppen und dienen nur zu Informationszwecken. Sie sind nicht vollständig und sollten daher nicht als Ersatz für die Gebrauchsanweisung, die Serviceanleitung oder eine medizinische Beratung herangezogen werden. Getinge übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Handlungen oder Unterlassungen einer Person oder Partei, die auf diesem Material basieren, und das Vertrauen in dieses Material erfolgt ausschließlich auf Risiko der Benutzer/-innen.

Die genannten Therapien, Lösungen oder Produkte sind möglicherweise in Ihrem Land nicht verfügbar oder zulässig. Informationen dürfen ohne schriftliche Genehmigung von Getinge weder ganz noch teilweise kopiert oder verwendet werden.

Möglicherweise steht die behördliche Zulassung zur Vermarktung der dargestellten Produkte in Ihrem Land noch aus. Bitte beachten Sie, dass der Farbton zwischen Bildern und tatsächlichen Produkten variieren kann. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer zuständigen Getinge-Vertretung.

Hersteller:
Getinge Disinfection AB · Ljungadalsgatan 11 · 352 46 Växjö · Schweden · +46 10 335 06 00 · info@getinge.com

Das Produkt ist auch mit Produkten der folgenden Hersteller kompatibel:
Getinge IT Solutions ApS · Dampfargevej 21 · 2100 Copenhagen · Dänemark · +45 33 33 88 55 · info@getinge.com
Getinge Sterility Assurance · 74 Inverness Drive East · Englewood, CO 80112 · USA · +1 303-660-4201 · info@getinge.com
Quadralene Limited · Unit 3, St. Modwen Park, Andressey Way · Derby · DE21 6YH · UK · +44 (0)1332 292500 · info@getinge.com
Maquet GmbH · Kehler Str. 31 · 76437 Rastatt · Deutschland · +49 7222 932-0 · info@getinge.com.

Ihren lokalen Getinge-Vertriebspartner finden Sie unter der folgenden Adresse:
Getinge Deutschland GmbH · Kehler Str. 31 · 76437 Rastatt · Deutschland · +49 7222 932-0 · info.vertrieb@getinge.com
Getinge Österreich GmbH · Lemböckgasse 49, Haus 2, Stiege D, EG · 1230 Wien · Österreich · +43 1 8651487-0 · info-at@getinge.com
Getinge Schweiz AG · Quellenstrasse 41B · 4310 Rheinfelden · Schweiz · +41 61 836 47 70 · info@getinge.ch

Besuchen Sie unser Experience Center:
Getinge Experience Center Frankfurt · De-Saint-Exupéry-Straße 10 · 60549 Frankfurt am Main · Deutschland · gec.frankfurt@getinge.com

Healthmark Industries Company, Inc. · 18600 Malyn Blvd. · Fraser Michigan 48026 · USA · +1 586 774 7600 · healthmark@hmark.com