



Getinge Gesamtangebot für Praxiskliniken und ambulante OP-Zentren

Hochwertige Ausstattung
direkt vom Hersteller



Mit unserem Gesamtangebot profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung als Hersteller hochwertiger Medizinprodukte.



Projektmanagement

Ein erfahrener Projektmanager von Geringe ist Ihr verlässlicher Partner in der Koordination, Planung und Überwachung Ihres Projekts, damit effiziente Ergebnisse im festgelegten Zeitrahmen erzielt werden.

Zu unserem Angebot gehören:

- Bedarfsanalyse
- Beratung
- Planung
- Auswahl der medizinischen Ausstattung
- Installation und Inbetriebnahme
- Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs in der Umbauphase mit der flexiblen Container-Lösung Geringe GetTainer



Finanzierung

Mit unseren Nutzungsverträgen können Sie Kosten für Neuanschaffungen in monatlichen Nutzungsraten an die Nutzungsdauer der Anschaffungen anpassen und somit von einer finanziellen Sicherheit und Beweglichkeit profitieren. Darüber hinaus bieten wir die Möglichkeit, Produkte von Fremdanbietern über unser Rundum-sorglos-Paket mit zu finanzieren.

Zu unserem Angebot gehören:

- Finanzierung
- Erstanschaffung
- Schulungen und Einweisungen
- Austausch oder Reparaturen
- Service und Upgrades
- Wartung



OP- Ausstattung

Unsere bewährten Produkte bekannter Marken wie Maquet, myMedis und Pulsion geben Ihnen Sicherheit in allen Bereichen Ihres ambulanten Operationszentrums.

Zu unserem Angebot gehören:

- Operationstische
- Operationsleuchten
- Narkosegeräte
- IT-Lösungen zur Prozessoptimierung
- Mobiliar
- Modulare Raumsysteme
- Ruheraum
- Service



Sterilgutaufbereitung

Mit unseren speziell auf ambulante OP-Zentren zugeschnittenen Komplettlösungen für Ihre Instrumentenaufbereitung bieten wir ein umfassendes Sortiment an Geräten, Zubehör und Verbrauchsmaterialien. Entsprechend Ihren speziellen Anforderungen liefern wir eine optimale Lösung für Desinfektion und Sterilisation.

Zu unserem Angebot gehören:

- Reinigung- und Desinfektionsgeräte
- Sterilisatoren
- Beladungssysteme
- Durchlaufsiegelgeräte
- Zubehör
- Verbrauchsgüter

Qualitativ hochwertiges Equipment bekannter und bewährter Marken

Unsere bewährten Produkte bekannter Marken wie Maquet, myMedis und Pulsion geben Ihnen Sicherheit in allen Bereichen Ihres ambulanten Operationszentrums.

OP-Tische

– für alle chirurgischen Fachdisziplinen

Die mobilen OP-Tische und das Zubehör von Getinge sind modular, ergonomisch und können für viele Fachdisziplinen eingesetzt werden. Das Produktportfolio besteht aus unterschiedlichen Modellen von Tischen, die


nach Bedarf konfiguriert werden können. Alle OP-Tische bieten optimale Lösungen für jeden chirurgischen Bereich und jede chirurgische Anforderung.



	Maquet Lyra	Maquet Meera CL	Maquet Meera ST	Maquet Meera
Gewicht	190 kg	218 kg	291 kg	291 kg
Länge der Langerfläche ohne Zubehör	745 mm	765 mm	860 mm	860 mm
Max. Gesamtbelastung (ohne Patient)	360 kg mit Einschränkungen, 180 kg ohne Einschränkungen	454 kg bei normaler Lagerung, 250 kg bei Reverse-Lagerung	454 kg bei normaler Lagerung, 250 kg bei Reverse-Lagerung	454 kg bei normaler Lagerung, 250 kg bei Reverse-Lagerung
Trendelenburg/Reverse-Trendelenburg	25° / 25°	25° / 35°	25° / 35°	25° / 35°
Kantung	15°	20°	20°	20°
Untere Rückenplatte	+75° / -40°	+75° / -40°	+70° / -40°	+70° / -40°
Beinplatte	-90° (manuell)	-90° (manuell)	+80° / -90° (motorisch)	+80° / -90° (motorisch)
Längsverschiebung	310 mm (manuell)	310 mm (motorisch)	keine	310 mm (motorisch)

Operationsleuchten

– für Ihre Bedürfnisse

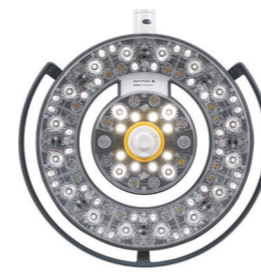

Maquet PowerLED II
Garantiert Operateuren klares und brillantes Licht ohne Blendwirkung.

- Comfort Light reduziert die Augenermüdung
- Einstellbarer Leuchtfeld-Durchmesser verhindert periphere Blendung
- Laserpositionierung ermöglicht optimale Beleuchtungsparameter
- Antibakterielle Beschichtung verbessert die Hygiene im OP
- Verschiedenfarbiges Umgebungslicht schärft den Kontrast



Maquet Volista
Sorgt für optimale Sichtverhältnisse, auch bei komplizierten Eingriffen.

- Adaptive Beleuchtungsintensität sorgt für optimale Sicherheit
- Konstante Ausleuchtung während des gesamten chirurgischen Eingriffs
- Boost-Funktion für Situationen, in denen Sie eine zusätzliche Beleuchtung benötigen
- Natürliche Farbwiedergabe
- Optimale Sicht auch bei minimalinvasiven Eingriffen



Maquet Lucea 50 und 100
Erfüllt individuelle Anforderungen durch verschiedene Variationen

- Flux Stability Program in allen Lampen enthalten
- Steuerung der Beleuchtung mit nur einem Knopfdruck
- Erhältlich als mobile Version, als Wand- oder Deckenleuchte, sowie als batteriebetriebene Version

Deckenversorgungseinheiten

– sichere Versorgung durch ergonomische Arbeitsplätze



Maquet Moduevo

- Ergonomische, effiziente Lösung, die es ermöglicht die Bedürfnisse der Patienten zu priorisieren
- Hohe Flexibilität durch die Aktionsradien der Tragarmsysteme von bis zu 3.147 mm



Narkosegerät

– für reibungslose Arbeitsabläufe im OP

Flow-c

ist ein kompaktes Narkosegerät, bei dem jedes Detail so konzipiert wurde, dass es Ihre Arbeitsabläufe erleichtert und eine kosteneffiziente und sichere Behandlung für Patienten ermöglicht.

- Findet in jedem OP Platz wegen kompakter Abmessungen
- Intuitiver Touchscreen, kipp- und drehbar
- Low-Flow-Anästhesie mit Begrenzung des FGF (Frischgasfluss) auf 0,1 l/min und visueller Anzeige
- Aktiver Hypoxie-Schutz O₂Guard für zusätzliche Sicherheit



OP-Mobiliar Angebote von Getinge

– bekannt für Sicherheit und Langlebigkeit



Resist Mobiliar

Alle Produkte entsprechen den Empfehlungen der Berufsgenossenschaft sowie aktuellen Vorschriften und Sicherheitsstandards.



Mayo Instrumentenzureichetische

Die Instrumentenzureichetische unterstützen das OP-Team, die täglichen Aufgaben müheloser und ergonomischer zu erledigen. Die Tische sind in drei Versionen erhältlich – je nach Budget und Anforderungen.

Klinisches Informationsmanagement von Getinge

– unterstützt die Prozesse in verschiedenen Bereichen des ambulanten OP-Zentrums



myMedis
Krankenhausweite
Planung und Dokumentation



T-DOC
Sterilgutversorgung



Tegris
Integration



Getinge Online
Digitaler Service



myMedis - die IT-Lösung im Ambulanten Operieren

umfasst verschiedene Module, die sowohl als Insellösung als auch als Teil einer integrierten IT-Landschaft eingesetzt werden können:

- Belegarzt-Portal
- Tourenplanung
- Perioperativer Arbeitsplatz
- Anästhesie- und OP-Dokumentation
- EPRD Datenübermittlung
- Patientenmanagement
- Mitarbeiter-Kalender
- Arztbriefe
- Digitales Diktat
- Formularwesen
- Leistungserfassung
- Klinische Auswertungen

Modulare Raumsysteme

– für eine Atmosphäre, die das Wohlbefinden von Patienten und Mitarbeitern verbessert



Getinge IN2 OP

Das Getinge IN2 OP-System ermöglicht reibungslose Arbeitsabläufe und effiziente Übergänge für all Ihre chirurgischen Fachgebiete.



Getinge IN2 AEMP

Das Getinge IN2 AEMP Wandsystem hilft Ihnen, einen saubereren und effizienten Arbeitsplatz für die Sterilgutaufbereitung zu schaffen.

Hohe Hygienestandards für eine sichere medizinische Einrichtung

Getinge ist der Experte für die Erstellung eines nahtlosen Arbeitsablaufs bei der Instrumentenaufbereitung. Wir können Sie dabei unterstützen, einen effizienten und kosteneffektiven Arbeitsablauf zur Optimierung des Prozesses zu entwickeln ab dem Zeitpunkt, an dem die Instrumente benutzt worden sind, bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie sicher sind und wiederbenutzt werden können.

Das Barriersystem

Die Konzepte von Getinge beruhen auf dem Barriereprinzip, das eine eindeutige Trennung zwischen unreinen, reinen und sterilen Bereichen sicherstellt. Die Bereiche werden durch Reinigungs- und

Desinfektionsgeräte mit Durchreichfunktion voneinander getrennt. Unabhängig von der Größe und den Bedingungen Ihrer Einrichtung können unsere Fachleute eine effektive Lösung erstellen.



Reinigungspistole

Konzipiert für die Anwendung in unreinen Vorreinigungsbereichen in Aufbereitungseinheiten. Speziell geeignet für feingliedrige Instrumente.



Getinge Elmasonic Med

Die Getinge Elmasonic Med Ultraschall-Reinigungsgeräte verfügen über ein modernes Design mit einfach zu reinigenden Edelstahloberflächen sowie einer abwischbaren Tastatur/Anzeige.

Unreiner Bereich

– vom OP bis zur Reinigung und Desinfektion



WD 14 Tablo

Ein vollautomatisches Tischgerät zur Reinigung und Desinfektion.



Aquadis 56

Flexible, effiziente und nachhaltige Reinigungs- und Desinfektionsgeräte für bis zu 12 DIN-Siebe.



WD 46

Schnelles und kompaktes Reinigungs- und Desinfektionsgerät für bis zu 10 DIN-Siebe.



Getinge Clean

Ein komplettes und umfassendes Sortiment an Reinigungsmitteln, das optimale Leistung bei effizientem und wirtschaftlichem Durchsatz liefert.



Getinge Clean Management System

Ein zentrales Dosiersystem, das mit Reinigungs- und Desinfektionsgeräten, Ultraschall-Reinigungsgeräten und manuellen Reinigungsstationen verbunden werden kann, um die richtige Reinigungsmittelmenge an jedem Einsatzort in Ihrem Krankenhaus sicherzustellen.



Zubehör

Ein umfassendes Sortiment an Zubehör und Beladeausrüstungen sichert bestmögliche Hygiene und Ergonomie.

Reiner Bereich

– prüfen und verpacken



Getinge SMART-Distributionsrollwagen

Für den effektiven und ergonomischen Transport von Körben und Containern.



Inspektions- und Verpackungstisch

Die Tische sind speziell zum Sortieren, Prüfen und Verpacken von verschiedenen Sets chirurgischer Instrumente entworfen. Ihr Design fokussiert auf Flexibilität, Ergonomie und Funktionalität.

Steriler Bereich

– von der Sterilisation bis zum OP

Getinge bietet eine Reihe von Sterilisatoren mit hoher Kapazität in kompakter Bauform sowie Komplettsysteme mit Beladeausrüstung und Zubehör, die einen effizienten Instrumentendurchlauf und einen ergonomischen Arbeitsplatz bieten.



HS33

Hohe Kapazität bei geringer Stellfläche

Erhältlich in zwei Kammermodellen: Als Einzeltür- oder Doppeltürmodell (Durchreichfunktion) mit automatischen oder manuell betriebenen vertikalen platzsparenden Schiebetüren



Getinge Stericool

Ein auf vaporisiertem Wasserstoffperoxid (H₂O₂) und Plasma basierender Sterilisator für die Endsterilisation von hitze- und feuchtigkeitsempfindlichen Instrumenten.



Getinge Assured-Indikatoren zur Reinigungs- und Sterilisationsüberwachung

Ein breites Spektrum an Protein-Rückstände-Tests für Oberflächen und Instrumente, einschließlich Hohlkörper-Lumen und Endoskope, zur abschließenden Überprüfung.



QR Code scannen
und registrieren

Sie möchten mehr erfahren?

Kontaktieren Sie uns!

<https://www.getinge.com/de/kontakt/>

GETINGE 

Wir bei Getinge sind davon überzeugt, dass jede Person und Gesellschaft Zugang zur bestmöglichen Versorgung haben sollte. Daher bieten wir Krankenhäusern und Life-Science-Einrichtungen Produkte und Lösungen an, welche die klinischen Ergebnisse verbessern und die Arbeitsabläufe optimieren sollen.

Das Angebot umfasst Produkte und Lösungen für die Intensivmedizin, kardiovaskuläre Eingriffe, Operationssäle, Sterilgutaufbereitung und Life Science. Getinge beschäftigt über 10.000 Mitarbeiter weltweit und die Produkte werden in mehr als 135 Ländern verkauft.

Maquet GmbH · Kehler Str. 31 · 76437 Rastatt · Germany · +49 7222 932-0

Ihren lokalen Getinge-Vertriebspartner finden Sie unter der folgenden Adresse:

Getinge Deutschland GmbH · Kehler Str. 31 · 76437 Rastatt · Deutschland · +49 7222 932-0 · info.vertrieb@getinge.com

Getinge Österreich GmbH · Lemböckgasse 49 · 1230 Wien · Österreich · +43 1 8651487-0 · info-at@getinge.com

Getinge Schweiz AG · Quellenstrasse 41b · 4310 Rheinfelden · Schweiz · +41 71 335 03 03 · info@getinge.ch

www.getinge.com