



Effizient und nachhaltig

Genaue und gleichbleibende konstante Ergebnisse mit dem Getinge GSS67H Steam Sterilizer



GETINGE

P1
00:09



Ein kostengünstiger und umweltfreundlicher Sterilisator

Wir haben einen Wendepunkt bei der globalen Nachhaltigkeit erreicht. Nachhaltige Technologien sind keine Mehrwert-Lösungen mehr, die für einen Aufpreis zu haben sind, sondern sollten vielmehr zentraler Bestandteil des Alltagsgeschäfts sein.

Daher haben wir den Getinge GSS67H Steam Sterilizer so konzipiert, dass er umweltfreundlich ist, ohne die hochwertige Sterilisation zu beeinträchtigen, auf die sich Ihr Krankenhaus verlässt.

mit Reindampf auf der Grundlage von hochwertiger Technologie, die ohne zusätzliche Kosten weniger Wasser und Energie verbraucht.

Der Getinge GSS67H Steam Sterilizer bietet Ihnen wesentlich mehr als ein handelsüblicher Dampfsterilisator, zum Beispiel die Möglichkeit zur Sterilisation



Verlängerte Lebensdauer von Ausrüstung und Instrumenten

Investitionen bestmöglich vornehmen

Gelöste Metalle und Mineralien im Dampf können zu Verfärbungen und Kalkablagerungen in der Kammer führen. Somit kann es im Laufe der Zeit auch zu Instrumentenverfärbungen, Lochfraß oder Korrosion kommen.

Ein Reindampfprozess kann die langfristigen finanziellen Auswirkungen von vorzeitigem Instrumentenwechsel und Ausrüstungsausfällen verringern.

Zur Standardausstattung des GSS67H Sterilizer gehört ein Reindampfsystem. Wir verwenden Rohrleitungen, Ventile und andere Komponenten aus hochwertigem Edelstahl im GSS67H Sterilizer, um die Versorgung mit


reinem Dampf sicherzustellen. Optionen für integrierte Edelstahlkessel und die Speisewasseraufbereitung sind ebenfalls erhältlich.

Das Ergebnis ist ein zuverlässiges, effizientes System, das die Betriebskosten senkt und gleichzeitig den finanziellen Aufwand für Ausfallzeiten und Geräteaustausch minimiert.

Schnelle, umweltfreundliche Zyklen

Um den Verbrauch natürlicher Ressourcen zu senken, muss man keine längeren Durchlaufzeiten hinnehmen. Eine hocheffiziente Vakuumpumpe gehört zur Standardausstattung des GSS67H Sterilizer. Diese Pumpe senkt nicht nur den Wasserverbrauch immens, sondern verringert auch die Zykluszeit für einen höheren Durchsatz.

Zudem verfügt der GSS67H Sterilizer standardmäßig über ein Wassersparsystem, welches einen Großteil des Wassers zurückführt, das zur Kühlung und Schmierung der Vakuumpumpe verwendet wird. Einfach spitzenmäßig für die Umwelt und den Geldbeutel!

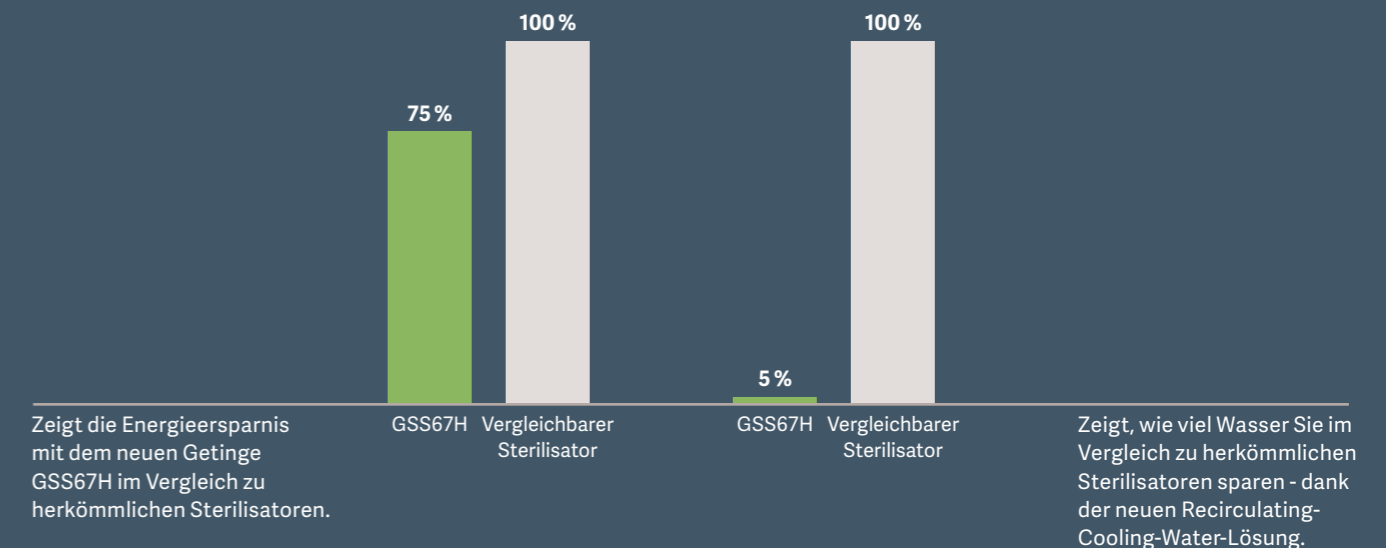

Bis zu **20–30 %** weniger Energieverbrauch

Bis zu **95 %** weniger Wasserverbrauch

Verbesserter Workflow für mehr Effizienz

Der GSS67H Sterilizer wurde in Zusammenarbeit mit Anwendern von Sterilisatoren und ZSVA-Managern entwickelt, um ein intuitives und effizientes System zu schaffen, das das Risiko für menschliches Versagen reduziert. Der Sterilizer kann auch die Beladekapazität erhöhen, den Durchsatz verbessern und die Stillstandszeiten für Reinigung und Prüfung reduzieren.



Optimiertes Kammerdesign

Das Design maximiert die Beladekapazität pro Zyklus und reduziert gleichzeitig den Platzbedarf. Äußerst flexible Beladekonfigurationen ermöglichen die Platzierung von hohen Behältern und Verpackungen unterschiedlicher Größe. Eine vertikale Tür benötigt weniger Stellfläche als horizontal gleitende Türen, was den Platzbedarf der Einheit minimiert.



Automatische An- und Abschaltfunktion

Das automatische Anlaufsystem reduziert die Zeit bis zum Start des ersten Prozesses effektiv und der Kammermantel vor der Systemprüfung kann effektiv einen zusätzlichen Sterilisationszyklus pro Schicht hinzufügen, um den Gesamtdurchsatz zu erhöhen.

Intuitive Benutzeroberfläche

Der GSS67H Sterilizer ist mit einer innovativen und bedienerfreundlichen Benutzeroberfläche ausgestattet. Das intuitive Design reduziert den Schulungsbedarf und kann auch von weniger erfahrenen Mitarbeitern problemlos bedient werden.

Das große hochauflösende 10-Zoll-Display ist auch aus der Entfernung einfach abzulesen und zu überwachen. Der Bildschirm zeigt die wichtigsten Prozessinformationen klar und übersichtlich an, wie z. B. die verbleibende Zykluszeit und die beim Starten getroffene Auswahl.



Status auf einen Blick: Die verbleibende Reinigungsdauer ist auch aus einiger Entfernung gut zu erkennen.


Hygienisches, leicht zu reinigendes Design

Hochwertige, polierte Edelstahloberflächen mit glatten, abgerundeten Ecken. Eine Spülkammertür und wenige Nähte erleichtern die schnelle und effektive Reinigung.




RFID-fähige Anmeldung


Eine elektronische RFID-Anmelde-Funktion steuert den Anwenderzugriff. Dabei wird die gleiche Sicherheitskodierung verwendet wie sonst auch in der Einrichtung, um Zeit zu sparen, das Risiko menschlichen Versagens zu senken und die Rückverfolgung zu verbessern.

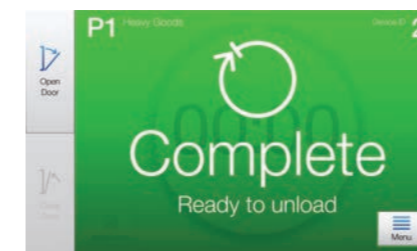

Die Benutzeroberfläche liefert klare und übersichtliche Informationen – und zwar nur die Informationen, die Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt benötigen, nicht mehr.

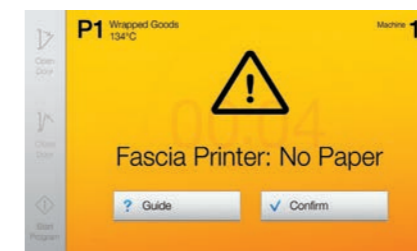

Klare und einfach zu verstehende Hilfen zur Problembeseitigung oder für den Zugang zu erweiterten Funktionen sind über die Benutzeroberfläche direkt verfügbar.

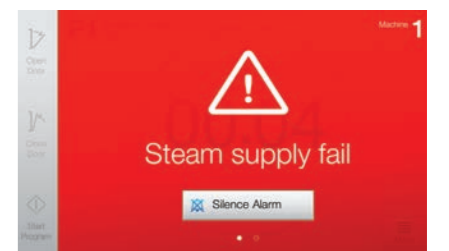

Jeder ausgelöste Alarm wird mit Bildschirmanweisungen für die jeweils zu ergreifenden Maßnahmen angezeigt.

Effizientes Be- und Entladen

für den ergonomischen Transport steriler Güter

Getinge bietet eine Auswahl an automatischen und manuellen Beladesystemen, um den täglichen Arbeitsablauf in Ihrer zentralen Sterilgutabteilung zu verbessern und gleichzeitig für mehr Bedienkomfort und Sicherheit zu sorgen.

Intelligente Rollwagen bewegen mühelos schwere Lasten

Getinge Smart Trolleys sind einfach zu manövrieren und zu reinigen und zeichnen sich durch eine fast mühelose halbautomatische Be- und Entladung aus. Die elektrische Power-Drive-Funktion hilft, schwere Lasten mühelos aus dem Stillstand zu bewegen und reduziert so die ergonomische Belastung.

Automatisches Be- und Entladen erhöht die Effizienz

Der Getinge Automatic Loader/Unloader GL64 ist ein vollautomatisches System zur Entladung/Beladung eines Getinge GSS67H Sterilizer mit Ladegut. Das System optimiert die Handhabung von Ladegut, ohne dass eine direkte Überwachung durch den Benutzer erforderlich ist. Es minimiert die manuelle Handhabung und unterstützt einen ergonomischen Arbeitsablauf für das Personal.

Besserer Durchsatz mit dem Air Glide System (AGS)

Die innovative, vollständig automatische Lösung von Getinge mit einem einzigen Beladepunkt verbessert den Durchsatz für ZSVAs mit mehreren Sterilisatoren. In dem Moment, in dem ein Sterilisator frei ist, wird er automatisch neu beladen. Dies ermöglicht eine maximale Verfügbarkeit und Auslastung.



Intelligente AHT-Rollwagen für die Be-/Entladung.

Wir bieten komplette, effiziente, wirtschaftliche und ergonomische Handlingsysteme für Körbe und Container. Ob automatisch oder manuell: Wir passen jedes Detail individuell an, um die Arbeit für jede ZSVA leichter und effizienter zu machen – egal, ob Sie einen oder zehn Sterilisatoren nutzen!



Automatische Be- und Entladeeinheit für Körbe (GL64B).



Automatische Be- und Entladeeinheit für Einsatzgestelle (GL64SR).

Effizientes Datenmanagement

rationalisiert den Arbeitsablauf und stellt die Verantwortlichkeit sicher



Die bewährten Praktiken Ihrer zentralen Sterilgut-versorgungsabteilung stehen im endlosen Kampf gegen Krankenhausinfektionen an vorderster Stelle. Die Möglichkeit, Sterilitätsdaten effizient zu dokumentieren und abzurufen, bietet Aufsichtsbehörden, Akkreditierungsorganisationen und einer immer besser informierten Öffentlichkeit Sicherheit.

Echtzeit-Zugriff auf Daten

Getinge Online ist Ihr persönliches Kundenportal im Web, das von Ihrem Computer oder Smartphone aus einen On-Demand-Zugriff auf die Gerätedaten ermöglicht. Dieses sichere und verschlüsselte Online-Tool liefert sowohl Echtzeitdaten als auch historische Leistungsdaten, Informationen zu Ersatzteilbestellung, vorbeugender Wartung und Maßnahmen zur Fehlersuche.

Erfassung und Speicherung von Echtzeit-Zyklusdaten

Getinge GSS67H Steam Sterilizer lassen sich in T-DOC, unsere Lösung für das Sterilgut-Management, integrieren und versorgen das System mit Echtzeit-Zyklusdaten. Das ist eine wertvolle Informationsquelle für ZSVA-Manager und Krankenhausverwalter, um Probleme zügig beheben, die Produktionsplanung verbessern und die Konformität überprüfen zu können.



Durchlauf-Versiegelungsgeräte

sorgen für ein validiertes Versiegeln steriler Beutel und Verpackungen

Getinge Pack Flat Sterilgutbeutel und -rollen, in Kombination mit unseren Durchlauf-Versiegelungsgeräten, bilden eine wirksame mikrobielle Barriere. Gemeinsam tragen sie dazu bei, die Sicherheit Ihrer Patienten zu gewährleisten, indem das Risiko einer erneuten Kontamination nach der Sterilisation deutlich minimiert wird.

Produkte sicher für die Sterilisation verpacken

Sterilgutbeutel und -rollen sind gebrauchsfertig und für Dampf-, Ethylenoxid- und Formaldehyd-Sterilisatoren geeignet.

In Kombination mit Getinge Durchlaufversiegelungsgeräten werden die Rollen und Beutel in einem automatisierten Prozess versiegelt, der wiederholbare und effektive Versiegelungsergebnisse gewährleistet.

Rollen und Beutel effizient versiegeln

Die benutzerfreundlichen Getinge Durchlaufversiegelungsgeräte verbessern die Effizienz des Bedieners und liefern gleichzeitig eine hohe Versiegelungsqualität. Sie sind für ein sicheres, effektives und zuverlässiges Versiegeln von Rollen und Beuteln aus medizinischem Papier oder Vliesstoff konzipiert.



Standardbeutel



Standardrolle



Selbstversiegelnde Sterilgutbeutel



Getinge ProSeal

Packaging type	Steam	EO	Formaldehyde
Standard rolls	•	•	•
Standard pouches	•	•	•
Self-seal pouches	•	•	•

Reinigung und Kontrolle

– Genaue und gleichbleibende Ergebnisse

Das Getinge Verbrauchsmaterialangebot ist ein umfassendes Portfolio an Produkten, die Sie bei jedem Schritt Ihres Arbeitsablaufs unterstützen. Getinge Produkte entsprechen den relevanten Standards und gewährleisten eine gleichbleibende und genaue Qualität Ihrer Ergebnisse.

Umfassende Indikatoren für Reinigung und Sterilisationssicherheit

Die routinemäßige Verwendung unserer Getinge Assured Indikatoren bietet Ihnen eine zusätzliche Sicherheit, dass der Sterilisationsprozess wirksam und zuverlässig ist. Die Indikatoren können als Teil eines Audits oder zur routinemäßigen Leistungsüberwachung verwendet werden.



Der Getinge Bowie-Dick-Typentest ist für die tägliche Prüfung der mechanischen Funktion Ihres vakuumunterstützten Dampfsterilisators vorgesehen, um sicherzustellen, dass das Entlüftungssystem wie erwartet funktioniert.

Getinge Clean

Unser Getinge Clean Chamber Foam erleichtert die Wartung Ihres Sterilisators. Der Schaum verringert den Zeitaufwand für die Reinigung und lässt sich leicht mit einem feuchten Tuch abwischen. Das Produkt hinterlässt eine saubere Kammer, die frei von Kalk, mineralischen Ablagerungen und Gerüchen ist. Sogar Rost kann entfernt werden.



Zusätzlich zu den Bowie-Dick-Testkits umfasst das umfangreiche Portfolio von Getinge Assured Sterility Assurance Folgendes:

- Reinigungskontrolle
- Oberflächenüberwachung
- Sterilisationsbänder
- Biologische Indikatoren – Dampf und EO
- Inkubatoren und Zubehör
- Chemische Indikatoren
- Steuersysteme (Ladung)
- Aufzeichnungsprodukte

Sorgfältige Pflege Ihrer Investition

Getinge Care Technischer Service

Wir bieten Dienstleistungen an, die zur optimalen Nutzung und zum nachhaltigen Wert Ihrer Getinge-Geräte beitragen. Mit einem Getinge-Care-Servicevertrag erhalten Sie vorbeugende Wartung, Original-Ersatzteile, einfache Fehlerbehebung und proaktiven technischen Service durch unsere zertifizierten Servicemitarbeiter – so können Sie sicherstellen, dass Ihre Geräte jederzeit sicher und zuverlässig arbeiten.

Betriebszeit und Performance schützen

Die Optimierung der Leistung Ihrer Getinge-Geräte ist ein zentraler Bestandteil der Effizienz im Krankenhaus. Tag für Tag verlassen sich Ihre Mitarbeiter auf unsere Geräte für eine betriebssichere und hervorragende Versorgung ihrer Patienten.

Mit einem Getinge-Care-Servicevertrag steigern Sie die Betriebszeit und halten ungeplante Kosten auf einem Minimum. Durch die Einhaltung eines routinemäßigen, vorbeugenden Wartungsplans stellen Sie sicher, dass alles rund läuft und es nur wenige Unterbrechungen gibt.

Kompetenter Service und mehr Sicherheit

Als Originalhersteller können wir die bestmögliche Wartung, Reparatur und aktuelle Updates Ihrer Produkte gewährleisten.

Als Ihr Servicepartner arbeiten wir mit Ihnen zusammen, um die beste technische Servicelösung für Ihre Bedürfnisse zu finden und Sie bei eventuell auftretenden Problemen zu unterstützen.

Teil des umfangreichen Services-Angebots von Getinge

Um Ihnen die bestmöglichen Dienstleistungen zu bieten, berücksichtigen wir alle Aspekte der Gesundheitsversorgung.

Von strategischer Zusammenarbeit und Finanzierungslösungen über die Planung und Gestaltung von Arbeitsabläufen bis hin zu Projektrealisierung, Weiterbildung und Schulung, digitalen Services und technischem Service: **Immer auf Ihre operativen und finanziellen Ziele ausgerichtet.**



Getinge Care Preventive

Feste Wartungsintervalle für maximale Verfügbarkeit



Getinge Care Plus

Vollständiger Schutz bei voller Kostenkontrolle



Getinge Care Premium

Vollständiges Versorgungspaket ohne unerwartete Kosten

Flexibel und transparent

Getinge Finanzierungslösungen

Modernste Medizintechnik, maßgeschneiderte Finanzierung und erfolgreiche Projekte

Individuelle Finanzierungslösungen für Ihre Investitionsprojekte

Mit einer einzigartigen Kombination aus wirtschaftlichem Engagement und Fachexpertise im medizinischen Bereich sind wir ihr zuverlässiger Partner für die Finanzierung von Medizintechnik. Die starke regionale Präsenz ermöglicht es uns, auf die spezifischen Bedürfnisse und Herausforderungen der Unternehmen und Länder einzugehen.


Finanzielle Sicherheit und stabile Finanzierung

Mit den Finanzierungslösungen von Getinge profitieren Sie von langfristiger Investitionssicherheit und Flexibilität auf höchstem Niveau - ohne große Abhängigkeiten. Gemeinsam mit Ihnen sorgen wir dafür, dass Sie Zugang zur modernsten Medizintechnik haben und diese auch finanziell realisieren können. Getinge zeichnet sich durch langjährige Erfahrung, umfassendes Know-how und eine ausgeprägte Expertise im Gesundheitswesen aus, wodurch wir Ihnen als verlässlicher Finanzierungspartner zur Seite stehen.

Dank unserer stabilen, langjährigen Partnerschaften mit Exportkreditagenturen, lokalen Partnern und einem engagierten Netzwerk von Kreditgebern können wir Ihnen eine vielfältige Palette an Finanzierungsoptionen anbieten.

Optimierte Lösungen für Ihren Bedarf

Suchen Sie nach einer Finanzierungslösung für Transaktionsvolumina in kleinerem oder mittlerem Umfang? Dann sollten Sie mit uns sprechen! Unsere Lösungen sind nicht nur auf große Auftragsvolumina ausgerichtet, sondern eignen sich auch ideal für kleine und mittlere Transaktionen. Unsere schrittweise Vorgehensweise zielt darauf ab, den Finanzierungsprozess für Sie so einfach und transparent wie möglich zu gestalten.

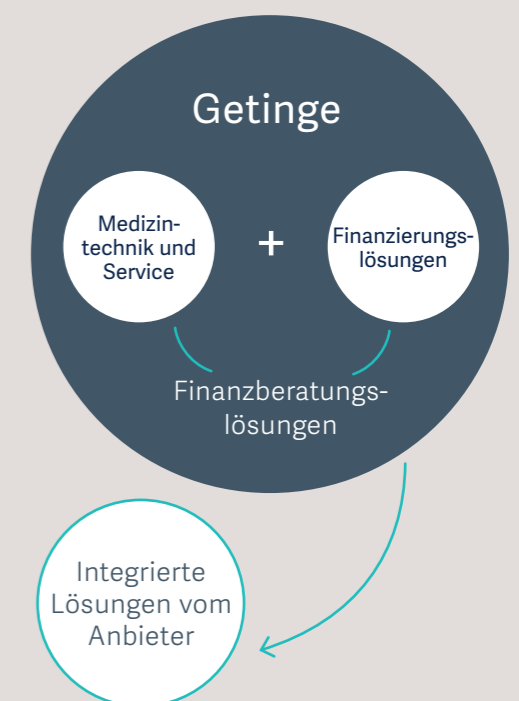

Unser engagiertes Team begleitet Sie durch den Prozess, um Ihnen zu helfen, die passende Finanzierung für Ihre Produkte zu finden. Wir stehen Ihnen zur Seite, um die verschiedenen Optionen zu erläutern und die optimale Lösung für Ihre Bedürfnisse zu ermitteln.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, zögern Sie nicht, sich an Ihren Getinge-Vertriebsmitarbeiter zu wenden:

info.financialservices@getinge.com



Diese Informationen richten sich ausschließlich an medizinisches Fachpersonal oder andere Fachkreise und dienen nur zu Informationszwecken, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sollten daher nicht als Ersatz für die Gebrauchsanweisung, das Servicehandbuch oder medizinischen Rat herangezogen werden. Getinge trägt keine Verantwortung oder Haftung für Handlungen oder Unterlassungen einer Partei, die auf diesem Material basiert und Risiken trägt ausschließlich der Benutzer.

Möglicherweise sind die genannten Therapien, Lösungen oder Produkte in Ihrem Land nicht verfügbar oder erlaubt. Ohne schriftliche Genehmigung von Getinge dürfen die Informationen weder ganz noch teilweise kopiert oder verwendet werden. Die geäußerten Ansichten, Meinungen und Behauptungen sind ausschließlich die der Befragten und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von Getinge wider.

Getinge Infection Control AB • PO Box 69 • SE-305 05 Getinge • Sweden • +46 10 335 00 00 • info@getinge.com

Ihren lokalen Getinge-Vertriebspartner finden Sie unter der folgenden Adresse:

Getinge Deutschland GmbH • Kehler Str. 31 • 76437 Rastatt • Deutschland • +49 7222 932-0 • info.vertrieb@getinge.com

Getinge Österreich GmbH • Lemböckgasse 49 • 1230 Wien • Österreich • +43 1 8651487-0 • info-at@getinge.com

Getinge Schweiz AG • Quellenstrasse 41B • 4310 Rheinfelden • Schweiz • +41 61 836 47 70 • info@getinge.ch

Besuchen Sie unser Experience Center:

Getinge Experience Center Frankfurt • De-Saint-Exupéry-Straße 10 • 60549 Frankfurt am Main • Deutschland • gec.frankfurt@getinge.com

www.getinge.de