



Wertorientiertes Design.
Vertrauen durch Sicherheit.
Getinge Solsus 66
Dampfsterilisator

Die Lösung für Ihre täglichen Herausforderungen Sicherheit, Zuverlässigkeit und Effizienz

Sie stehen vor der wachsenden Aufgabe, eine hochwertige medizinische Versorgung zu möglichst geringen Kosten zu liefern. Wir bieten Ihnen Komplettlösungen, die Ihnen dabei helfen, dies zu erreichen.

Getinge verfügt über langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Sterilgutaufbereitung. Auch beim Getinge Solsus 66 Dampfsterilisator, der alle geltenden Normen erfüllt, kommt eine solide Technologie zum Einsatz. Er ist zuverlässig und einfach zu bedienen. Darüber hinaus bietet er eine hohe Kapazität bei geringem Stellplatzbedarf.

Optimierung der täglichen Arbeit in der AEMP

Gesundheitseinrichtungen müssen einen Ausgleich zwischen einer qualitativ hochwertigen Versorgung und den Kostenvorgaben schaffen. Wir kennen diese Herausforderungen. Daher können wir Ihnen Komplettlösungen anbieten, die Sie dabei unterstützen, dem Bedarf Ihrer Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte (AEMP) gerecht zu werden.

Der Solsus 66 unterstützt die Reinigung und Aufbereitung hoher Instrumentenvolumina und ist in Einzel- und Doppeltürausführung erhältlich. Die ergonomischen Betriebsfunktionen erhöhen die Sicherheit des Personals und unterstützen zugleich effiziente Arbeitsabläufe.

Alle Getinge Sterilisatoren werden in einer nach ISO 14001 zertifizierten Produktionsstätte hergestellt, in der angestrebt wird, den Verbrauchs- und Ressourcenbedarf zu minimieren.



Kompakt und kostengünstig Erfüllt höchste Anforderungen

Ergonomisches und benutzerfreundliches Design

Der Getinge Solsus 66 Sterilisator ist hygienisch sowie intuitiv und einfach zu bedienen.

Große Kammerkapazität

Die großen Kammervolumina (von 449 bis 899 Litern) stellen sicher, dass Sie immer über freie Kapazitäten für die Sterilisation Ihrer Güter verfügen. Ein erstklassiges Verhältnis von Kapazität zu Abmessungen minimiert den Platzbedarf.

Zuverlässig und kostenwirksam

Der Solsus 66 ist ein zuverlässiger und kompakter Sterilisator. Er bietet eine hohe Kapazität bei sehr guter Kosteneffizienz. Mit Getinge können Sie sich auf eine hohe Zuverlässigkeit und eine einfache Wartung verlassen.

Energieeffizienz

Unser Ziel ist es, den Energieverbrauch zu optimieren, um die Klimaauswirkungen zu reduzieren. Das Getinge ECO Wassersparsystem begrenzt den Wasserverbrauch während der Sterilisationsprozesse.

Eine sichere Wahl

Die Getinge Solsus 66 Sterilisatoren erfüllen alle gängigen Standards. Das hygienische Design ist zuverlässig, wurde umfassend getestet und basiert auf der langjährigen Erfahrung von Getinge im Tätigkeitsspektrum des AEMP-Bereichs. Ein Durchreiche-System mit Verriegelung reduziert das Risiko von Kreuzkontaminationen.



Sie haben die Wahl:
Die Bedienpaneele können aus ergonomischen Gründen auch seitlich an der Kammer angebracht werden.

Hochpräzise Einfache Bedienung

Hochwertige Konstruktion

Die säurebeständigen Edelstahlkammern und Dampfmäntel sind robotergeschweißt und mit korrosionsbeständigem Aluminium ummantelt, um einen langen und störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

Intuitive Bedienung

Die einzigartige Benutzeroberfläche und ein benutzerfreundliches Design ermöglichen eine leichte Bedienung – unabhängig vom Erfahrungsgrad des Bedieners.

Platzsparende Bauweise

Die pneumatisch betätigte Vertikalschiebetür ermöglicht eine schnelle, platzsparende und berührungslose Handhabung.

Einfache Installation

Dank der kompakten Abmessungen passt er durch eine 900 mm breite Tür, was eine einfache und kostengünstige Installation gewährleistet.

Zusätzliche Dampfoption

Die Kombination von Zentraldampf und elektrischem Dampferzeuger ermöglicht Ihnen eine flexible Anwendung und stellt sicher, dass der Sterilisator so konfiguriert ist, um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden.

Leichter Zugang für den Service

Alle Komponenten sind für Wartungsarbeiten leicht zugänglich, entweder von der Seite oder durch die vollständig zu öffnende, schwenkbare Frontverkleidung.

Smart(e) Beladeausrüstung


Die Getinge Smart Rollwagen sind einfach zu manövrieren und zu reinigen und unterstützen einen ergonomischen und effizienten Fluss steriler Güter.




Intuitiv und einfach zu bedienen Macht Sie zum Experten

Der Solsus 66 zeichnet sich durch eine preisgekrönte und benutzerfreundliche Bedienerschnittstelle aus. Das intuitive Design ist identisch zu anderen Produkten von Getinge, reduziert den Schulungsbedarf und kann auch von weniger erfahrenen Mitarbeitern problemlos bedient werden.

Das große hochauflösende Display ist einfach abzulesen und zu überwachen. Kritische Statusinformationen werden übersichtlich und logisch angezeigt.

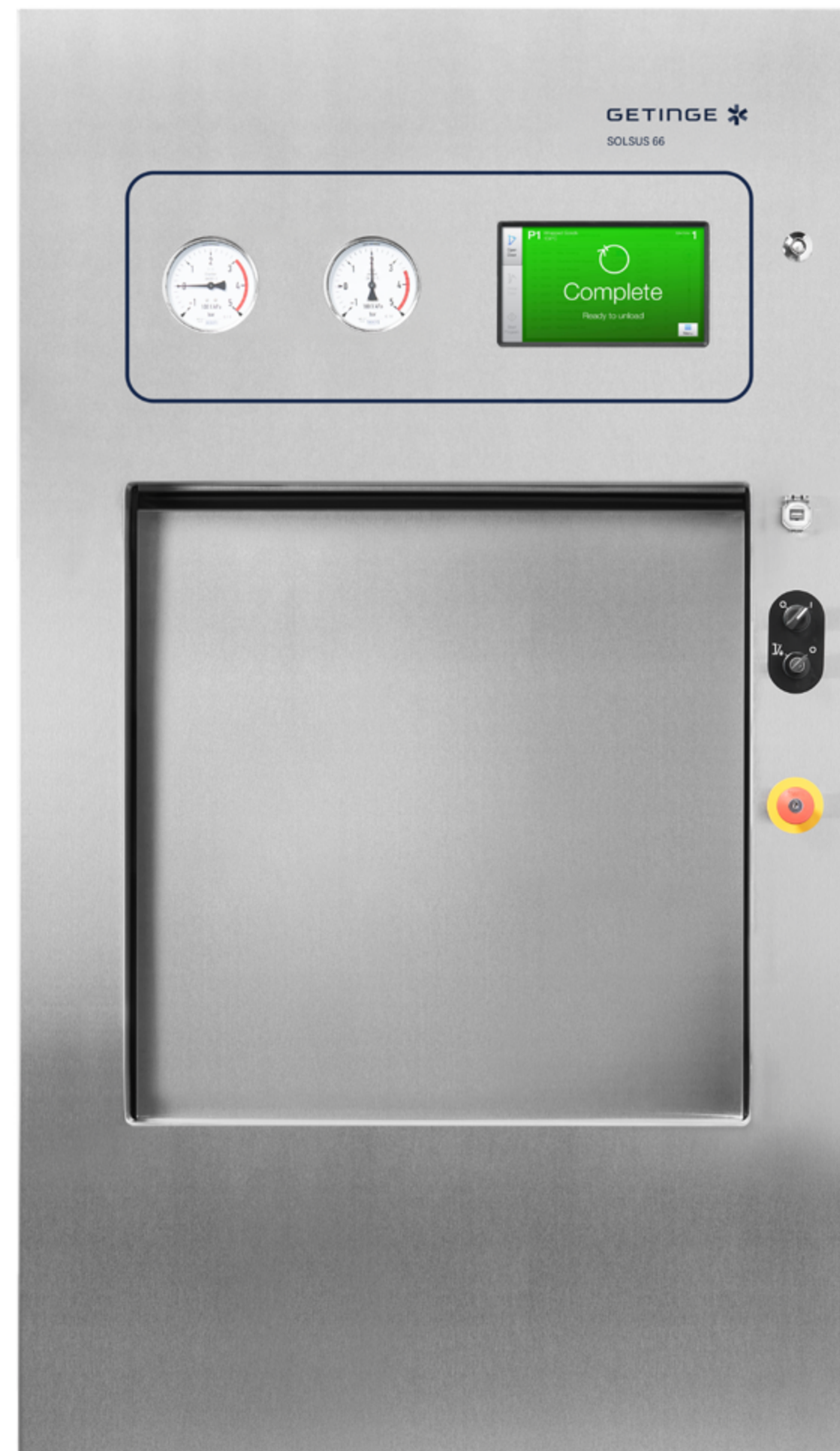

Programmauswahl und verbleibende Prozessdauer

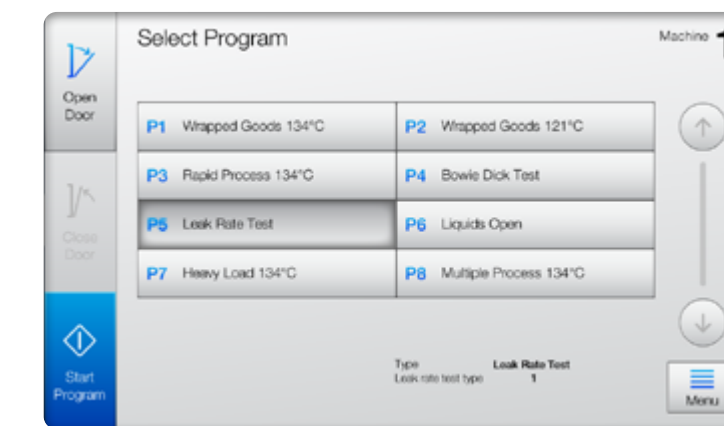


Übersichtliche Menüoptionen erleichtern die Auswahl des richtigen Programms.




Große 10-Zoll-Bildschirme erleichtern das Ablesen der verbleibenden Prozessdauer.

Status auf einen Blick

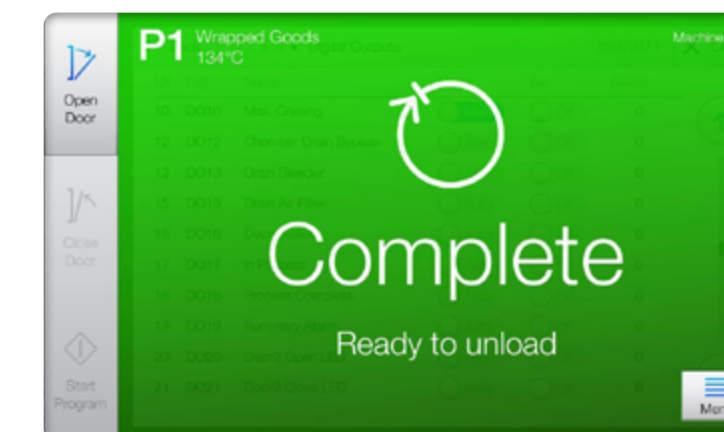

Die Benutzeroberfläche liefert klare und übersichtliche Informationen – und zwar nur die Informationen, die Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt benötigen, nicht mehr und nicht weniger.

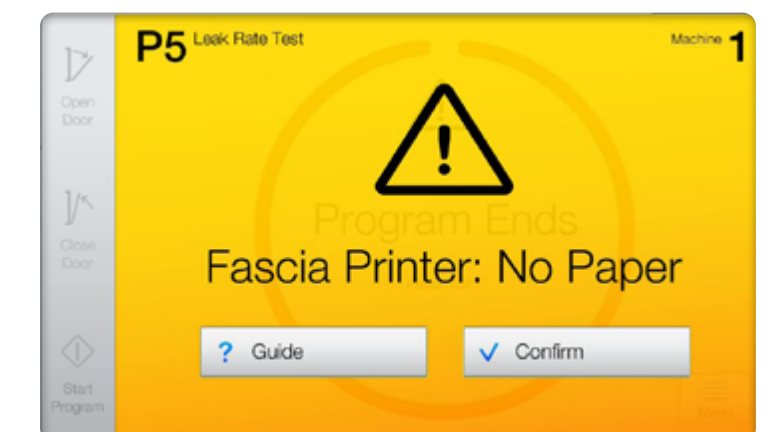

Klare und einfach verständliche Hilfen zur Problembeseitigung oder für den Zugang zu erweiterten Funktionen sind direkt über die Benutzeroberfläche verfügbar.

Beladeausrüstung Für sichere und ergonomische Handhabung

Die Beladeausrüstung spielt eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung eines effizienten Arbeitsablaufs in der AEMP. Durch die Berücksichtigung wichtiger Faktoren wie Ergonomie, Durchsatz und Kapazität hilft Ihnen die Ausrüstung der Getinge Smart-Reihe, das Beste aus Ihrer Abteilung herauszuholen.

Ein ergonomisches Konzept

Getinge Smart ist eine Reihe von durchdacht konstruierten Transportwagen, mit deren Hilfe die Beladung und Verteilung von chirurgischen Instrumenten auf ein ganz neues Niveau gehoben wird – ergonomisch wie funktional.

Getinge Smart Rollwagen können mit folgenden Funktionen ausgestattet werden:

- Einer halbautomatischen Beladefunktion (SAL) zur Reduzierung der manuellen Handhabung von Gütern beim Beladen oder Entladen.
- Flexiblen Arbeitshöhen – fest oder verstellbar, um die körperliche Belastung zu minimieren.
- Power-Drive-Funktion – eine optionale Funktion zur Unterstützung des Bedieners beim Manövrieren des Transportwagens in die gewünschte Position.

Diese optionalen Funktionen sorgen für eine gute Ergonomie und schaffen optimale Arbeitsbedingungen für Ihre Mitarbeiter.

Beispiele für mögliche Konfigurationen:



Manuelles Beladen/Entladen von Drahtkörben mit dem Getinge Smart Rollwagen mit fester Höhe (FHT).



Manuelles Beladen/Entladen von Containern mit dem höhenverstellbaren Getinge Smart Rollwagen (AHT) mit Power-Drive-Funktion.

Ein ressourceneffizienter Sterilisator

Mit intelligenten technologischen Lösungen

Wir bei Getinge ergreifen Maßnahmen, um unsere Kunden in die Lage zu versetzen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Dazu untersuchen wir beispielsweise, wie wir unsere Produkte und Lösungen so ressourceneffizient wie möglich gestalten können.

Wir verpflichten uns, unseren CO₂-Fußabdruck zu reduzieren. Dazu setzen wir uns ehrgeizige Ziele, um bis 2050 im Einklang mit der Science Based Targets Initiative (SBTi) validiert klimaneutral zu werden.

Alle Produktionsstandorte arbeiten mit Umweltmanagementsystemen gemäß ISO 14001. Erfahren Sie mehr über die Nachhaltigkeitsziele von Getinge auf unserer Website.

→ Erfahren Sie mehr über unsere Nachhaltigkeitsziele

EcoDesign ist bei Getinge Standard und konzentriert sich auf die Verwendung von sichereren und weniger Materialien, die Integration zirkulärer Lösungen und die Reduzierung des Medien-, Energie- und Wasserverbrauchs.

Reduzierter Energieverbrauch

Unser vorrangiges Umweltschutzziel besteht darin, Produkte mit einem geringen Energieverbrauch zu entwickeln und auf diese Weise die Auswirkungen auf das Klima zu reduzieren.

Der Solsus 66 nutzt das optionale ECO-System zur Reduzierung des Wasserbedarfs an der Vakuumpumpe und trennt Abwasser von wiederverwendbarem Kühlwasser – eine innovative technologische Lösung, um einen kontrollierten Verbrauch sicherzustellen.

Digitale Vernetzung Sterilgut-Management

Der Getinge Solsus 66 kann in T-DOC, die Sterilgutmanagement- und Rückverfolgbarkeitslösung von Getinge, integriert werden. T-DOC erfasst und speichert Echtzeit-Zyklusdaten und ermöglicht die Berichterstattung über die Geräteleistung. Diese wertvolle Informationsquelle hilft AEMP-Managern und Krankenhausverwaltern, Probleme zügig zu beheben, die Produktionsplanung zu verbessern und die Konformität sicherzustellen.

Unsere Lösung wächst mit Ihren Anforderungen an eine vollständige Rückverfolgbarkeit, optimierte Instrumenten- und Geräteauslastung und pünktliche Lieferung für Operationen.



Sicherstellung der Konformität mit Echtzeit-Datenprotokollierung und Speicherung


→ Erfahren Sie mehr über T-DOC



Digitale Vernetzung Management des Gerätelebenszyklus

Verbinden Sie Ihren Solsus 66 mit FleetView, um Echtzeit-Servicedaten und Nutzungseinblicke zu erhalten. Es hilft Ihnen, die Verfügbarkeit und Leistung Ihrer Geräte zu optimieren und ermöglicht gleichzeitig die Bestellung von Ersatzteilen, die Fehlerbehebung aus der Ferne und fachkundigen Support. Alles ist über ein kundenspezifisches und sicheres Webportal von Ihrem Tablet, Telefon oder Computer aus zugänglich.

FleetView ermöglicht eine präzise Wartungsplanung, hilft dabei, Störungen zu vermeiden, und unterstützt fundierte Entscheidungen zur Steigerung von Zuverlässigkeit und Konformität – wodurch die Gesamtbetriebskosten nachhaltig gesenkt werden.

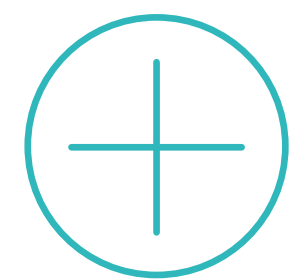

Verbessern Sie den Durchsatz bei der sterilen Aufbereitung, um mit der chirurgischen Nachfrage Schritt zu halten.



Erfahren Sie mehr über FleetView





Präzise und konsistente Ergebnisse gewährleisten Verbrauchsmaterialien

+ Assured Indikatoren

Der routinemäßige Einsatz unserer Getinge Assured Indikatoren bietet Ihnen den unabhängigen Nachweis, dass der Sterilisationsprozess konstant und effektiv durchlaufen wurde.

Getinge Assured Bowie-Dick-Tests überwachen die effektive Entlüftung und Dampfdurchdringung, damit Sie Ihren Solsus 66 Sterilisator für den täglichen Gebrauch freigeben können.



+ Getinge Clean

Der Kammerschaum der Produktreihe Clean von Getinge erleichtert die Reinigung Ihrer Sterilisatoren. Der Schaum erleichtert die Reinigung und lässt sich mit einem feuchten Tuch einfach abwischen. Er entfernt Kalkablagerungen, mineralische Ablagerungen und Gerüche aus der Kammer.



→ Weitere Informationen über Getinge Verbrauchsmaterialien



Präzise und konsistente Ergebnisse gewährleisten Verbrauchsmaterialien


+ Verpackungen und Siegelnahtgeräte

Getinge Pack Sterilisationsbeutel und -rollen wurden entwickelt, um eine effektive mikrobielle Barriere zu bieten, die das Risiko einer Rekontamination nach der Sterilisation minimiert.

In Verbindung mit einem Durchlauf-Siegelnahtgerät verwendet, erfolgt ihr Verschluss im Rahmen eines automatisierten und validierten Prozesses, wodurch wiederholbare und effektive Versiegelungsergebnisse gewährleistet werden.



Standardbeutel

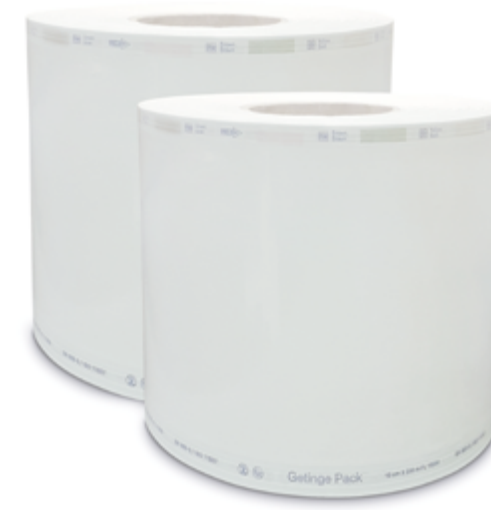

Standardrolle



Getinge Pack Siegelnahtgerät



Getinge ProSeal

→ Weitere Informationen über Getinge Verbrauchsmaterialien

Sich um diejenigen kümmern, die für andere sorgen

Getinge Services

Getinge Services sind auf Ihre individuellen Anforderungen ausgerichtet und unterstützen Sie dabei, eine bestmögliche Patientenversorgung und Krankenhauseffizienz zu erreichen.

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Serviceanforderungen mit Getinge zu kombinieren und eine höhere Pflegequalität, Patientensicherheit, Geräteverfügbarkeit, Mitarbeiterzufriedenheit und einen optimierten Ressourceneinsatz zu gewährleisten.

Um Sie bestmöglich zu unterstützen, berücksichtigen wir alle Gesichtspunkte der Gesundheitsversorgung. Von der Wertschöpfung im Unternehmen und Finanzierungslösungen über die Planung und Gestaltung von Arbeitsabläufen bis hin zu Projektrealisierung, Mitarbeiterschulung, digitalen Supportlösungen und vorbeugender Wartung für eine höhere Geräteverfügbarkeit. Immer auf Ihre operativen und finanziellen Ziele abgestimmt.

Als Ihr Servicepartner arbeiten wir eng mit Ihnen zusammen, um Chancen und Herausforderungen zur Verbesserung der Behandlungsergebnisse und zur Optimierung Ihres Ressourceneinsatzes zu erkennen. Immer mit dem Ziel, einen bewährten Mehrwert für Ihr Krankenhaus zu schaffen.



Technische Daten

Kammervolumen und Größe

Modell	Innenabmessungen (B x T x H)	Nutzbare Fläche (B x T x H)	Kammervolumen
ST004-10	672 x 672 x 1000 mm	660 x 660 x 1000 mm	449*/461 L
ST004-13	672 x 672 x 1300 mm	660 x 660 x 1300 mm	584* / 595 L
ST004-17	672 x 672 x 1700 mm	660 x 660 x 1700 mm	764 L
ST004-20	672 x 672 x 2000 mm	660 x 660 x 2000 mm	899 L

*Einzeltürkonfiguration (nur für die Modelle ST004-10 und ST004-13 verfügbar)

Kapazität

Modell	STE	ISO	SPRI
ST004-10	6	6	6
ST004-13	8	9	9
ST004-17	10	12	12
ST004-20	12	12	12

1 STE = 600 x 300 x 300 mm

1 ISO = 600 x 400 x 200 mm

1 SPRI = 585 x 395 x 195 mm



Diese Informationen richten sich ausschließlich an medizinisches Fachpersonal oder andere professionelle Zielgruppen und dienen nur zu Informationszwecken. Sie sind nicht vollständig und sollten daher nicht als Ersatz für die Gebrauchsanweisung, die Serviceanleitung oder eine medizinische Beratung herangezogen werden. Getinge übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Handlungen oder Unterlassungen einer Person oder Partei, die auf diesem Material basieren, und das Vertrauen in dieses Material erfolgt ausschließlich auf Risiko der Benutzer/-innen.

Die genannten Therapien, Lösungen oder Produkte sind möglicherweise in Ihrem Land nicht verfügbar oder nicht zulässig. Diese Informationen dürfen ohne schriftliche Genehmigung von Getinge weder ganz noch teilweise kopiert oder verwendet werden.

Möglicherweise steht die behördliche Zulassung zur Vermarktung der genannten Produkte in Ihrem Land noch aus. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Getinge-Vertretung.

Hersteller:

Maquet GmbH • Kehler Str. Getinge Deutschland GmbH • Kehler Str. 31 · 76437 Rastatt · Deutschland · +49 7222 932-0 · info.vertrieb@getinge.com

Getinge Österreich GmbH • Lemböckgasse 49 · 1230 Wien · Österreich · +43 1 8651487-0 · info-at@getinge.com

Getinge Schweiz AG • Quellenstrasse 41B · 4310 Rheinfelden · Schweiz · +41 61 836 47 70 · info@getinge.ch

Besuchen Sie unser Experience Center:

Getinge Experience Center Frankfurt • De-Saint-Exupéry-Straße 10 · 60549 Frankfurt am Main · Deutschland · gec.frankfurt@getinge.com

Das Produkt ist auch mit Produkten der folgenden Hersteller kompatibel:

Getinge Disinfection AB • Ljungadalsgatan 11 · 352 46 Växjö · Schweden · +46 10 335 06 00 · info@getinge.com

Getinge IT Solutions ApS • Dampfargevej 21 · 2100 Copenhagen · Dänemark · +45 33 33 88 55 · info@getinge.com

Getinge Sterility Assurance • 74 Inverness Drive East · Englewood, CO 80112 · USA · +1 303-660-4201 · info@getinge.com