



Maquet Ezea OP-Leuchte

Chirurgische Präzision überall

GETINGE ✱



Maquet Ezea OP-Leuchte Spezielle Lösungen für die medizinische Notfallversorgung

Maquet Ezea verbindet benutzerfreundliche Handhabung mit robuster Zuverlässigkeit und ist daher ideal für eine Vielzahl chirurgischer Anwendungen im Katastrophen- und sanitätsdienstlichen Einsatz geeignet.



Marineschiffe



Medizinische Container



Maquet Ezea OP-Leuchte Mobile Lösungen

Maquet Ezea ist auch in mobilen Versionen mit oder ohne Akku erhältlich



- Autonom: Mehr als 8 Stunden mit der batteriebetriebenen Version.
- Mühelos zu transportieren und bei Bedarf schnell aufgebaut.
- Entwickelt für den schnellen Einsatz in OP-Containern oder in Lazaretten.



Maquet Rolite M mit Akku



Maquet Rolite M ohne Akku

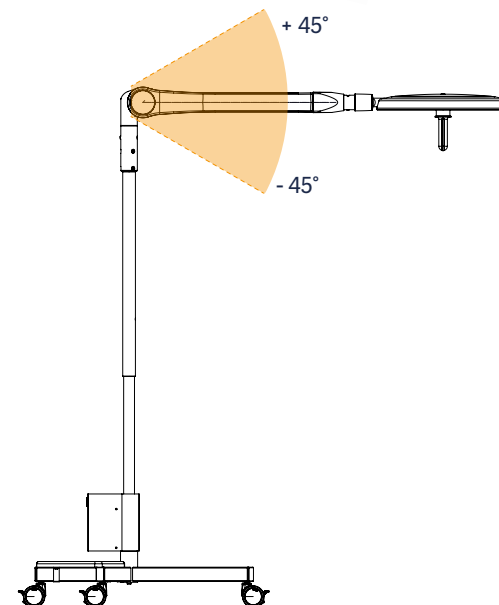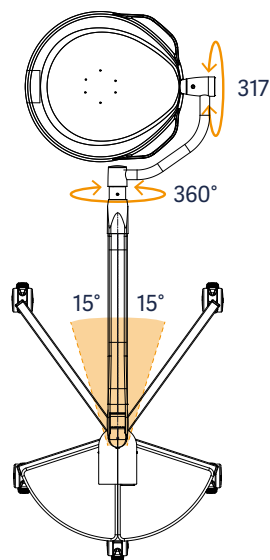




Maquet Ezea OP-Leuchte Schienenlösung

Diese Lösung wird an einer Deckenschiene installiert und eignet sich ideal für Umgebungen mit niedriger Deckenhöhe sowie kompakte, überfüllte Operationssäle.

Sichere Lösung

Die Parkposition ermöglicht die sichere Fixierung von Maquet EZEÄ, während dem Transport oder wenn diese nicht in Gebrauch ist.

Die Konfiguration umfasst ein leicht bedienbares Verriegelungssystem mit dem die beweglichen Gelenke fixiert werden können für eine stabile Positionierung der OP-Leuchte während des Eingriffes.

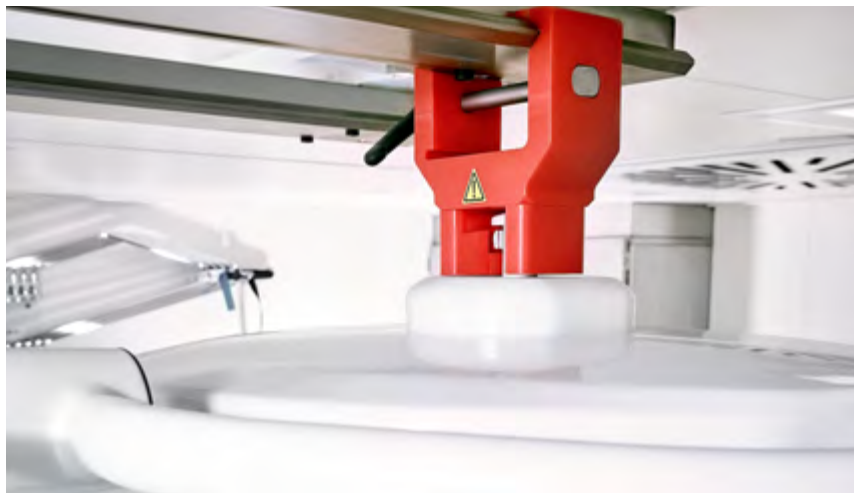

Die Parkposition gewährleistet Stabilität

Stabilität in dynamischen Schiffsumgebungen


- Entwickelt, um Vibrationen während der Bewegung des Schiffes zu minimieren, dank Schwingungsdämpfern, die zwischen dem Schienensystem und der Decke positioniert sind, werden Vibrationen abgedämpft und die Übertragung von Schwingungen reduziert.
- Das Schienensystem erlaubt eine reibungslose, leichtgängige horizontale Verstellung des Leuchtenkörpers.



Bremshebel sichern die Gelenke gegen unerwünschte Verstellungen



Maquet Ezea OP-Leuchte Schienenlösung

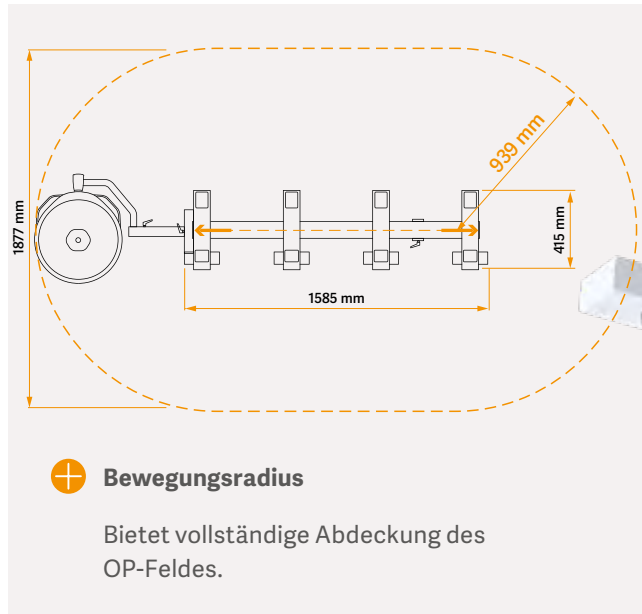


- + Lichtsteuerung über Bedienfeld an der Leuchte und kapazitive Wandtastatur**



Kapazitive Wandbedieneinheit



- + Platzsparend**
Ideal für kompakte Umgebungen und niedrige Deckenhöhen.

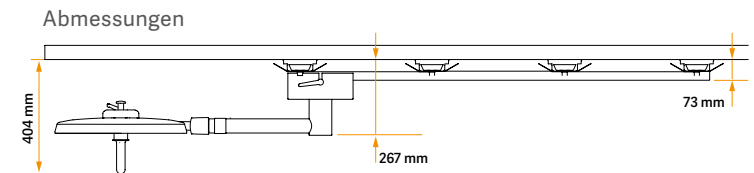




Maquet Ezea OP-Leuchte Ergonomisch

Einfache Handhabung, einfaches Manövrieren

- Zwei Außengriffe.
- Ultradünner Leuchtenkörper, rund 7 kg leichter
- Sanfte und stabile Federung.
- Intuitives Design und klare Symbole für eine mühelose Bedienung
- Bequeme Lichtsteuerung über das Bedienfeld am Leuchtenkörper oder die kapazitive Wandbedieneinheit.
- Rundes Design: freie Positionierung des Leuchtenkörpers und klare Sicht auf das Operationsfeld.
- Glatte, weich konturierte Oberfläche für eine problemlose Reinigung und Desinfektion.

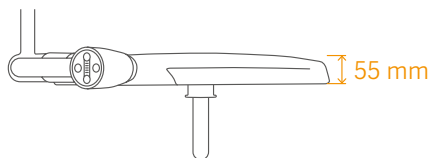



Maquet Ezea OP-Leuchte Lichtqualität

Feste Einstellungen beim Einschalten optimieren die Anwendung und sparen wertvolle Zeit

- Feste Leuchtfeldgröße (22 cm).
- Feste Farbtemperatur oder einstellbare Farbtemperatur als Option.
- Die verfügbare Lichtmenge reicht selbst für tiefste Kavitäten aus, ohne dass nachjustiert werden muss.
- Schaltet sich automatisch bei Dimmstufe 3 ein, geeignet für die meisten Eingriffe.
- Stabile Ausleuchtung: unser FSP ist ein integriertes Programm, das eine konstante und ununterbrochene Ausleuchtung gewährleistet. Dieses System passt die Stromversorgung an, wenn sich die LEDs erhitzen, und sorgt so für eine ideale und konstante Beleuchtungsstärke während des gesamten Eingriffs.



Diese Informationen richten sich ausschließlich an medizinisches Fachpersonal oder andere professionelle Zielgruppen und dienen nur zu Informationszwecken. Sie sind nicht vollständig und sollten daher nicht als Ersatz für die Gebrauchsanweisung, die Serviceanleitung oder eine medizinische Beratung herangezogen werden. Getinge übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Handlungen oder Unterlassungen einer Person oder Partei, die auf diesem Material basieren, und das Vertrauen in dieses Material erfolgt ausschließlich auf Risiko der Benutzerin oder des Benutzers.

Die genannten Therapien, Lösungen oder Produkte sind möglicherweise in Ihrem Land nicht verfügbar oder zulässig. Informationen dürfen ohne schriftliche Genehmigung von Getinge weder ganz noch teilweise kopiert oder verwendet werden.

Hersteller • Maquet S.A.S • Parc de Limère • Avenue de la Pomme de Pin • CS 10008 Ardon • 45074 Orléans, cedex 2 • Frankreich

Ihren lokalen Getinge-Vertriebspartner finden Sie unter der folgenden Adresse:

Getinge Deutschland GmbH • Kehler Str. 31 • 76437 Rastatt • Deutschland • +49 7222 932-0 • info.vertrieb@getinge.com

Getinge Österreich GmbH • Lemböckgasse 49 • 1230 Wien • Österreich • +43 1 8651487-0 • info-at@getinge.com

Getinge Schweiz AG • Quellenstrasse 41B • 4310 Rheinfelden • Schweiz • +41 61 836 47 70 • info@getinge.ch

Besuchen Sie unser Experience Center:

Getinge Experience Center Frankfurt • De-Saint-Exupéry-Straße 10 • 60549 Frankfurt am Main • Deutschland • gec.frankfurt@getinge.com

© 2025 Getinge | Getinge und **GETINGE**  sind Marken oder eingetragene Warenzeichen der Getinge AB, ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen.
DMS-0012404-DE-01 | Alle Rechte vorbehalten.

GETINGE 