

Maquet Ezea 手術用照明器

Simplicity redefined

低侵襲手術の視認性を向上

再調整の時間を短縮

フリクションリングを採用した安定したサスペンションシステムにより、適切な位置決めを行うことができ、灯体流れを防ぎます。メンテナンスやブレーキの再調整も必要最小限に抑えることができます。

安心の洗浄

滅菌可能なハンドルは、最大350回の洗浄にも対応します。

強固で信頼できるデザイン

移動型のモデルは、長年の実績を誇るデザインで、すでに実証済みの技術を取り入れています。丈夫な100%スチールシート構造により、耐久性と頑丈さを兼ね備えています。

アルミニウム製のライトヘッドフレームは、長期にわたる耐久性と信頼性をお届けします。

効率的な工学原理に基づく設計

- シンプル設計
- 容易なメンテナンス
- 最小限の部品点数
- LEDとメイン電子基板を1枚のPCBに集約し、不必要なケーブル配線や複雑なレギュレーションボードを排除

運用の中断を軽減

LEDの寿命は最大60,000時間。

あらゆるニーズに対応可能

さまざまな使用条件に対応できるため、幅広い用途に適しています。



シングルフォークバージョン
天井の低い部屋に最適



ダブルフォークバージョン
より自由な動きを実現



モバイルバージョン (バッテリーなし)
素早いセットアップのために




モバイルバージョン (バッテリー付き)
コンセントにアクセスできない場合に

Maquet Ezea 手術用照明器

Simplicity redefined


灯体は7kgの超薄型軽量灯体

アルミボディのため耐久性が向上

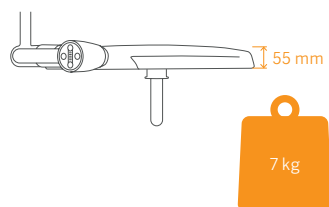


新規格のIEC規格に適合

火傷や組織の乾燥リスクを最小化

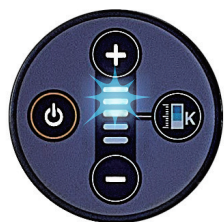


ESR調光技術

人の目の感度に従った調光技術

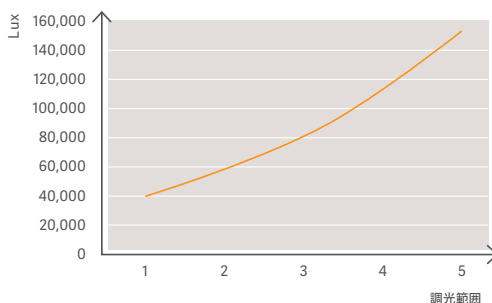

さまざまな手術に適合

調整範囲は、4,100K / 4,600K (調光モードはオプション)

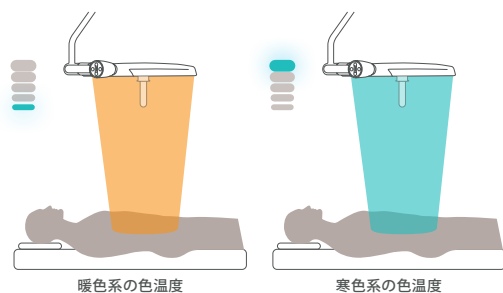

技術使用

光学特性	
最大照度	160,000 lux
照射野径 d10	22 cm
60%での照射深度	70 cm
色温度	固定：4,300 K 調整範囲：4,100 K / 4,600 K
演色係数	95
Careview	あり < 350 W/m ²
FSP (照度安定プログラム)	あり
アームの長さ	
シングルSF	1,150 mm
デュアルSF	1,000–1,150 mm
シングルDF	850 mm
デュアルDF	850–1,000 mm
デュアルSF/DF	1,000–1,150 mm

販売名：エゼア
一般的名称：手術用照明器
製造販売届出番号：13B1X00176SW0054
医療機器の分類：一般医療機器
特定保守管理医療機器
設置管理医療機器

Maquet Ezea Surgical Light Flyer
2025.09.PDF
Original: GGJ HCM SWP
※仕様は予告なく変更することがあります

GETINGE

ゲティンゲグループ・ジャパン株式会社

〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-8 スフィアタワー天王洲

TEL：03-5463-8313 FAX：050-3000-1988

第一種医療機器製造販売業許可番号：13B1X00176

www.getinge.com/jp

本情報は、医療従事者またはその他の専門家を対象とした情報提供のみを目的としています。本情報は網羅的ではないため、取扱説明書、サービスマニュアルまたは医療アドバイスの代わりとして用いることはできません。最新の情報および注意事項については、医療機器添付文書を参照してください。ゲティンゲは、この資料に基づいて行われたいかなる者の行為または不作為に対しても、一切の責任または義務を負いません。ご使用になられる場合は、ご自身の責任において行ってください。

ここに述べられた治療法、ソリューション、製品は、国によっては利用できない、または許可されていない場合があります。ゲティンゲの書面による許可なく、情報の全部または一部を複製または使用することはできません。